

📅 活動時間：即日起至12/15為止

年末促銷第一彈

買**1萬**即送抽獎券！

9/14~10/15 購買滿額 抽獎券**雙倍送**！
3萬元神秘大獎等您來抽 (完整品項請見封底)

重組蛋白專家 Recombinant proteins

用於細胞活性分析、細胞培養和免疫分析

PROSPEC
RECOMBINANT PROTEINS

來自生技工業發達的以色列，是您對專業要求的最佳選擇：經驗豐富層析技術、高純度、蛋白生物活性經過檢測確認、原廠貨源充足、超過6千種蛋白、盟基固定時間發單。

第二件**3折** (以價低者計)

💰
不限金額，
買就送抽獎券，
買越多送越多！

產品分類

- | | | |
|---|--|---|
| ■ Cytokines
Interferons, Interleukins, Angiopoietin | ■ Hormones
HCG, PTH, TSH | ■ Growth factors
CSF, EGF, FGF, Insulin, VEGF |
| ■ Enzymes
Esterase, Glycosylase, Ligase | ■ Chemokines
CCL, CXCL | ■ Viral antigens
EBV, HBV, HIV, SARS |
| ■ Natural proteins
Avidin, Thrombin, Transferrin | ■ Neurotrophins
CNTF, GDNF, MANF | ■ CD antigens
CD4, CD36, CD80 |




[註1] 加碼送抽獎券張數以品項種類數作計算，同一品項不論包裝和數目皆送一張，兩種品項送兩張，依此類推。
[註2] 列入抽獎券累積金額，並適用於雙倍送活動。

DNA cloning kit


✓ 應用: Subcloning; 組合多個 DNA 片段; 任意突變

✓ 優點:

1. 反應超快: 只要15分鐘
2. 克隆效率最棒: 優於其他7家廠商
3. 一次克隆超多片段: 至多12條
4. 限制酶位點無關 + 無縫連接
5. PCR product 可不用純化: 至少省下1小時

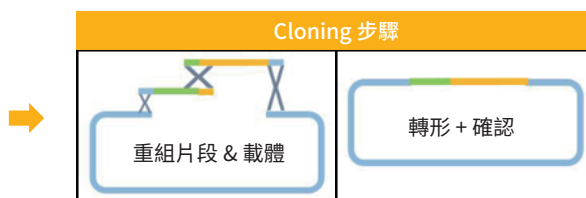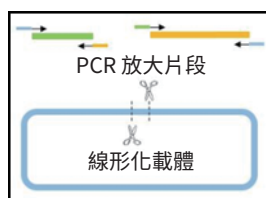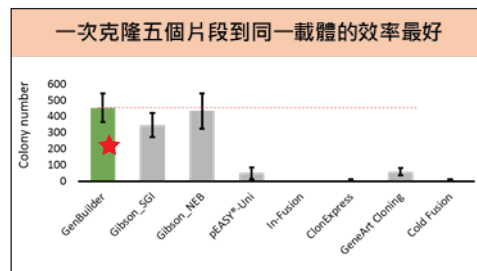

or

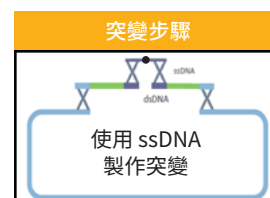

買就送 PCR mix & Gel extraction kit

10反應數: 好禮二選一 (A or B)

50反應數: 好禮通通有 (A + B)

A 5X FIREPol MasterMix Ready to Load 1mL (#04-12-00115, 04-12-00125 二擇一)

B Gel/PCR isolation kit 50 preps 一組 (#GP1001)

貨號	產品名稱	最多一次克隆條數	使用未純化 PCR 產物	使用 ssDNA 克隆 + 突變	反應數	定價	優惠價
L00701-10	GenBuilder® Cloning Kit	6	可	NO	10	18,100	10,860
L00701-50					50	33,700	20,220
L00744-10	GenBuilder® Plus Cloning Kit	12	優	Yes	10	19,200	11,520
L00744-50					50	39,200	23,520

OmicsBio 實驗用 Buffer


貨號	品名	包裝	售價	優惠方案
IB3012	10X Phosphate Buffered Saline Buffer, pH7.4 (10X PBS Buffer)	5 L	2,000	同品項買一送一
IB3052	10X Tris Buffered Saline Buffer, pH7.6 (10X TBS Buffer)		2,000	
IB3322	10X Tris Glycine Buffer (10X TG Buffer)		2,000	
IB3352	10X Western Transfer Buffer		2,000	
IB3372	10X Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X TGS Buffer)		2,000	
IB3011	10X Phosphate Buffered Saline Buffer, pH7.4 (10X PBS Buffer)	1 L	650	
IB3051	10X Tris Buffered Saline Buffer, pH7.6 (10X TBS Buffer)		650	
IB3111	0.5M EDTA, pH8.0	1 L	1,500	
IB3321	10X Tris Glycine Buffer (10X TG Buffer)	1 L	650	
IB3351	10X Western Transfer Buffer		650	
IB3371	10X Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X TGS Buffer)		650	
IB3541	0.5M Tris-HCl, pH6.8	1 L	1,500	
IB3551	1M Tris-HCl, pH6.8		1,500	
IB3531	1.5M Tris-HCl, pH8.8		1,500	
IB3601	4X Resolving Gel Buffer	1 L	1,500	
IB3611	4x Stacking Gel Buffer		1,500	
IB3801	20X Saline-sodium citrate Buffer, pH7.0 (20x SSC Buffer)	1 L	900	
IB3802	20X Saline-sodium citrate Buffer, pH7.0 (20x SSC Buffer)	5 L	3,000	
IB3211	50X TAE Buffer	1 L	1,500	
IB3251	10X TBE Buffer		975	

全面**7折**! 滿**1萬**就送
Protease inhibitor
cocktail 1 vial
(#HY-K0010P-1)

Resin

[吸附力較強 & 產物零損失]

純化效果完勝 G 牌

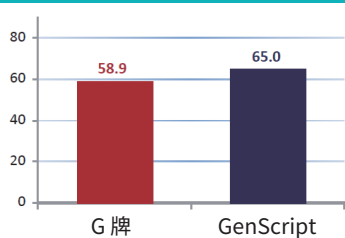


L00433 比起 G 牌有更高的結合能力

Magnetic Beads

[選擇磁珠，操作方便更快速]

吸附速度效果完勝 B 牌

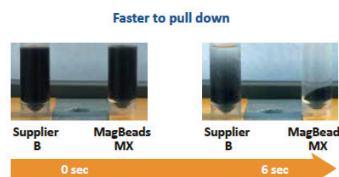

GenScript MagBeads MX
吸附速度更快

Resin 產品列表

純化標的	貨號	品名	純化效率 (/mL)	包裝	定價	優惠價
抗體	Antibody	L00210 Protein A Resin	>20 mg human IgG	5 mL	5,800	4,060
		L00464-5 Protein A Resin FF	>40 mg human IgG	5 mL	22,900	16,030
		L00209 Protein G Resin	>20 mg sheep IgG	5 mL	7,600	5,320
		L00664-5 Protein G Resin FF	≥20 mg human IgG	5 mL	24,400	17,080
		L00239 Protein L Resin	>15 mg rabbit IgG	2.5 mL	8,500	5,950
	Alkaline Stable Antibody	L00433-25 Monofinity A Resin	>30 mg human IgG	25 mL	98,500	68,950
	Antibody (Pre-packed Column)	L00433-11 Monofinity A Resin Prepacked Column	>30 mg human IgG	1 mL	10,000	7,000
		L00433-51 Monofinity A Resin Prepacked Column	>30 mg human IgG	5 mL	29,300	20,510
		L00680-12 Protein A Resin FF Prepacked Column	>40 mg human IgG	2 mL	14,800	10,360
		L00680-51 Protein A Resin FF Prepacked Column	>40 mg human IgG	5 mL	27,300	19,110
		L00681-12 Protein G Resin FF Prepacked Column	≥20 mg human IgG	2 mL	24,100	16,870
		L00681-51 Protein G Resin FF Prepacked Column	≥20 mg human IgG	5 mL	44,600	31,220
Tagged 蛋白	His tag	L00223-10 High Affinity Ni-charged Resin	45-60 mg (27 kD)	10 mL	4,700	3,290
		L00223-25 High Affinity Ni-charged Resin	45-60 mg (27 kD)	25 mL	9,900	6,930
		L00465-5 Ni Resin FF	>40 mg	5 mL	2,900	2,030
		L00465-25 Ni Resin FF	>40 mg	25 mL	12,300	8,610
		L00666-5 High Affinity Ni-Charged Resin FF	>45 mg	5 mL	3,700	2,590
		L00666-25 High Affinity Ni-Charged Resin FF	>45 mg	25 mL	14,900	10,430
	His tag (Pre-packed Column)	L00683-12 High Affinity Ni-Charged Resin FF Pre-packed Column	>45 mg	2 mL	3,900	2,730
		L00683-51 High Affinity Ni-Charged Resin FF Pre-packed Column	>45 mg	5 mL	6,600	4,620
		L00684-12 Ni-IDA Resin FF Pre-packed Column	>40 mg	2 mL	2,700	1,890
		L00684-51 Ni-IDA Resin FF Pre-packed Column	>40 mg	5 mL	5,600	3,920
其他	GST tag (Expression & purification)	L00206 Glutathione Resin	35-45 mg (26 kD)	10 mL	5,800	4,060
		L00207 GST Fusion Protein Purification Kit	35-45 mg (26 kD)	1 kit	8,200	5,740
	DYKDDDDK tag	L00208 Protein Expression and Purification kit	~1 mg DYKDDDDK-protein	1 kit	19,700	13,790
		L00432-1 Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin	~1 mg DYKDDDDK-protein	5 mL	16,500	11,550
		L00432-5 Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin	~1 mg DYKDDDDK-protein	10 mL	38,900	27,230
	Biotinylated	L00353 Streptavidin Resin	120 nmol D-Biotin	5 mL	8,200	5,740
	Sulphydryl-containing ligands	L00403 High-Affinity Iodoacetyl Resin	1 mg sulphydryl-containing peptides	10 mL	8,800	6,160
		L00404 High-Affinity Antibody Purification Kit	1 mg sulphydryl-containing peptides	1 kit	8,200	5,740
	Immuno-precipitation	L00405 Chicken IgY Precipitating Resin	1-6 mg chicken IgY	1 mL	10,000	7,000
		L00425 Anti-DYKDDDDK IP Resin	~1mg	1 mL	11,700	8,190

Magnetic Beads 產品列表


純化標目標	貨號	品名	純化效率 (/mL)	包裝	定價	優惠價
抗體	Antibody	L00273 Protein A MagBeads	>10 mg rabbit IgG	4 mL	5,300	3,710
		L00672-4 Protein A MagBeads MX	>30 mg human IgG	4 mL	26,900	18,830
		L00274 Protein G MagBeads	>10 mg goat IgG	2 mL	7,400	5,180
		L00673-4 Protein G MagBeads MX	>25 mg human IgG	4 mL	28,400	19,880
		L00277 Protein A/G MagBeads	>10 mg goat IgG	2 mL	8,700	6,090
Tagged 蛋白	His tag	L00295 Ni-charged MagBeads	5 - 20 mg (27kD)	8 mL	5,800	4,060
	GST tag	L00327 Glutathione MagBeads	20 - 30 mg GST	8 mL	6,400	4,480
其他	Biotinylated	L00424 Streptavidin MagBeads	>60 nmol free biotin	2 mL	9,700	6,790

與國際知名藥廠 Amgen 合作開發 新一代純化專用磁珠


AmMag™ Protein A Magnetic Beads

獨家耐鹼設計，效率不打折

- Unique Alkaline-resistant ligand
- Fast magnetic response

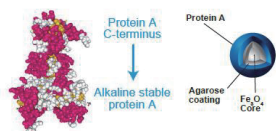


Reusability and Alkaline resistance

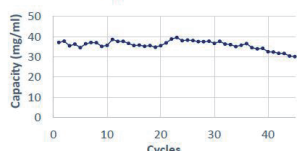

The capacity is reduced 20% after 45 cycles 0.1M NaOH treatment (1 h per cycle)

結合能力強，完勝 G 牌

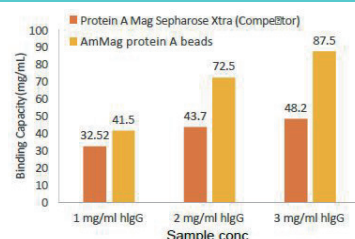

貨號	產品	效率 (/mL beads)	包裝	定價	優惠價
L00695	AmMag Protein A Magnetic Beads	>40 mg human IgG	4 mL	34,900	24,430
L00776-4	AmMag Ni Magnetic Beads	>10 mg 6xHis-tagged protein	4 mL	29,100	20,370

全面7折

內毒素移除 / 檢測套組

GenScript
Make Research Easy

內毒素非細菌/病毒實驗專有，實驗室環境中無所不在

有效避開內毒素
造成的免疫反應



- ① 細胞內發炎反應
- ② 動物內毒素休克及其他副作用



大幅提升實驗
的正確性

內毒素移除 Endotoxin Removal System

✓ 應用：輕鬆去除樣本中的內毒素

✓ 優點：

1. 品質穩定、去除效率高
2. 操作簡單、提升實驗效率
3. 吸附能力好，可去除 $>2,000,000$ EU/mL
4. Resin 可重複使用
5. 包裝含耗材一應俱全，不須額外準備

貨號	產品名稱	包裝	定價
L00338	ToxinEraser™ Endotoxin Removal Kit	1 kit	7,400

*套組中所有配件，包含 Resin, Regeneration Buffer, Equilibration Buffer, Endotoxin-free Tubes, Endotoxin-free Pipette Tips 皆可單獨購買，歡迎來電詢問！

內毒素去除 + 檢測
二合一禮包

L00338 + L00350C 只要 **\$7,900**


L00338 + L00350 只要 **\$10,900**

內毒素檢測 Endotoxin Detection Assay Kit

✓ 應用：內毒素濃度測定 (定量 & 定性皆有)

✓ 優點：

1. 偵測數值線性好，實驗再現性一級棒
2. 即開即用包裝，讓您實驗順利沒煩惱
3. 高靈敏度，偵測範圍廣 (0.01-1 EU/mL)
4. 操作簡易快速，提升實驗效率

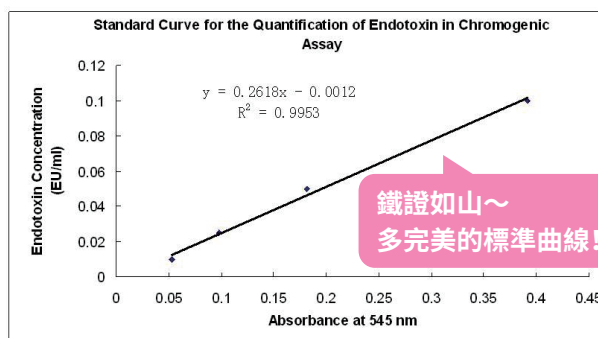

	ToxinSensor™ Chromogenic LAL Endotoxin Assay Kit	ToxinSensor™ Gel Clot Endotoxin Assay Kit	ToxinSensor™ Single Test Kit
應用	精準定量 (顏色變化)	簡易偵測 (凝膠法)	快速偵測 (凝膠法)
靈敏度	0.01-1 EU/ml	0.25 EU/ml	0.03 EU/ml- 0.25 EU/ml
Reconstitute LAL with LAL Reagent Water	Yes	Yes	No
分光光度計需求	Yes (OD 545nm)	No	No
包裝內容	◆Ready-to-use reagents ◆Endotoxin-free tips & tubes	◆Ready-to-use reagents ◆Endotoxin-free tips & tubes	◆Ready-to-use reagents
樣品要求	Colorless and Clear liquid	N/A	N/A
貨號 (包裝)/定價	L00350C (16 rxns) / \$5,300 L00350 (32 rxns) / \$10,000	L00351 (40 assays) / \$6,100	L00448-L00451 (20 assays) / \$5,300 (40 assays) / \$10,000

細胞凋亡 (apoptosis) 為程序性的細胞死亡 (programmed cell death), 為細胞重要的生理作用, Elabscience 提供四種方式做檢測, 從細胞凋亡早期的 Annexin V apoptosis assay 到晚期的 TUNEL assay, 應有盡有。

方法	Annexin V apoptosis assay	Caspase assay	Mitochondrial membrane potential assay (JC-1)	TUNEL assay
偵測目標	Phosphatidylserine (PS)	Caspase activity	Mitochondrial membrane potential	Fragmented DNA
凋亡階段	Early → Late			
偵測方法	Flow cytometry, Fluorescence microscopy	ELISA reader (OD)	Flow cytometry, Fluorescence microscopy	Fluorescence microscopy
反應時間	15-20 mins	2-4 hours	15-20 mins	90-100 mins

全面
5折起

滿1萬送細胞存活率檢測試劑 Cell Counting Kit 8 (WST-8 / CCK8) 100T (1mL) (#E-CK-A361)


Annexin V apoptosis assay

✓ 介紹: Annexin V 透過偵測 Phosphatidylserine (PS) 反應細胞凋亡的最早期, 有多種螢光選擇。

✓ 優點: 完整套組, 同時分析細胞凋亡和死細胞, 並且有多種螢光選擇。

✓ 應用: Flow cytometry

✓ 反應時間: 15-20分鐘

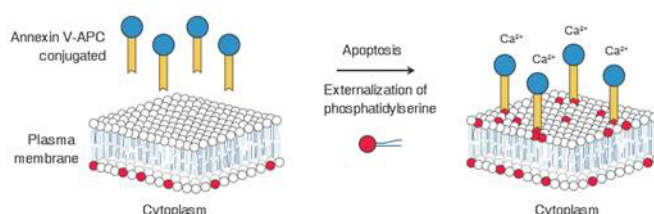

以下 Annexin V 套組選擇皆含 Annexin V-conjugate, Dead cell stain (PI or 7-AAD), Annexin V Binding Buffer

貨號	產品名稱	Annexin V 螢光 Ex/Em
HOT! E-CK-A211	Annexin V-FITC / PI Apoptosis Detection Kit	FITC: 490/530 nm
HOT! E-CK-A212	Annexin V-FITC / 7-AAD Apoptosis Detection Kit	
E-CK-A213	Annexin V-AF647 / PI Apoptosis Detection Kit	AF647: 650/670 nm
E-CK-A214	Annexin V-AF647 / 7-AAD Apoptosis Detection Kit	
HOT! E-CK-A216	Annexin V-PE / 7-AAD Apoptosis Detection Kit	PE: 495/565/575 nm
E-CK-A217	Annexin V-APC / PI Apoptosis Detection Kit	APC: 650/660 nm
HOT! E-CK-A218	Annexin V-APC / 7-AAD Apoptosis Detection Kit	
E-CK-A219	Annexin V-EGFP / PI Apoptosis Detection Kit	EGFP: 488/510 nm
E-CK-A220	Annexin V-EGFP / 7-AAD Apoptosis Detection Kit	
E-CK-A221	Annexin V-Cyanine5 / PI Apoptosis Detection Kit	Cyanine5: 650/670 nm
E-CK-A222	Annexin V-Cyanine5 / 7-AAD Apoptosis Detection Kit	
E-CK-A228	Annexin V-PE/Cyanine7 / 7-AAD Apoptosis Detection Kit	PE/Cyanine7: 495/565/755/775 nm
E-CK-A229	Annexin V-APC/Cyanine7 / PI Apoptosis Detection Kit	
E-CK-A230	Annexin V-APC/Cyanine7 / 7-AAD Apoptosis Detection Kit	APC/Cyanine7: 650/760/780 nm
E-CK-A233	Annexin V-EV450 / PI Apoptosis Detection Kit	
E-CK-A234	Annexin V-EV450 / 7-AAD Apoptosis Detection Kit	EV450: 410/450 nm
E-CK-A235	Annexin V-EV500 / PI Apoptosis Detection Kit	
E-CK-A236	Annexin V-EV500 / 7-AAD Apoptosis Detection Kit	EV500: 425/500 nm
E-CK-A237	Annexin V-AF488 / PI Apoptosis Detection Kit	
E-CK-A238	Annexin V-AF488 / 7-AAD Apoptosis Detection Kit	AF488: 495/520 nm

相同包裝均一價

包裝	定價	優惠價
20T	3,400	1,700
50T	6,800	3,400
100T	11,700	5,850
200T	18,000	9,000

*Elabscience 亦提供單獨購買 Annexin V-conjugate 和 PI (#E-CK-A161), 7-AAD reagent (#E-CK-A162), 歡迎來電洽詢。

Caspase assay


✓ 介紹: Caspase (cysteiny-l-aspartic acid proteases) 為細胞凋亡中最重要的酵素，會活化很多下游。

✓ 優點: 輕鬆偵測吸光值不須貴重儀器，且可偵測三種不同 caspase 的活性。

✓ 應用: ELISA reader (OD450)

✓ 反應時間: 2-4小時

機制示意圖: 檢測 OD450 nm

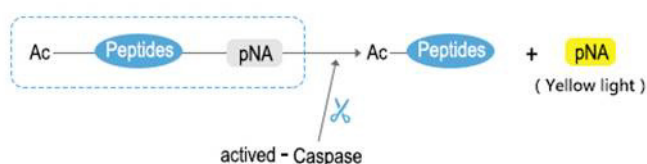

貨號	產品名稱	Target 序列	20T		50T		100T	
			定價	優惠價	定價	優惠價	定價	優惠價
E-CK-A311	Caspase 3 Activity Assay Kit (by Spectrophotometry)	DEVD						
E-CK-A312	Caspase 8 Activity Assay Kit (by Spectrophotometry)	IETD	3,100	2,000	6,200	4,000	10,300	6,700
E-CK-A313	Caspase 9 Activity Assay Kit (by Spectrophotometry)	LEHD						

*套組皆含有 Lysis Buffer, 2× Reaction Buffer, Ac-target sequences-pNA, DTT。


Mitochondrial membrane potential assay

✓ 介紹: JC-1 為帶有正電的染料。其原理為利用粒線體膜電位做染色，染料在正常的粒線體中會累積而形成 JC-1 aggregate 進而發出紅光 (585/590 nm)，而在細胞凋亡的粒線體中則會維持 JC-1 monomer 而發綠光 (510/527 nm)。

✓ 應用: Flow cytometry, Fluorescence microscopy

✓ 反應時間: 15-20分鐘

貨號	產品名稱	包裝	定價	優惠價
E-CK-A301	Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (with JC-1)	20T	4,900	2,500
		50T	9,800	4,900
		100T	16,700	8,400

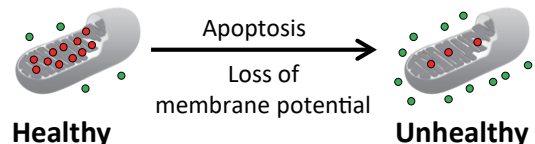


*套組中含有 JC-1 Reagent, Assay Buffer (10×), CCCP(10 mM) (positive control)。

TUNEL assay

✓ 介紹: TUNEL (TdT-mediated dUTP Nick-End Labeling) 透過偵測斷裂的 DNA 反應細胞凋亡的晚期。透過 terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) 在斷裂的 DNA 加上酵素或螢光標記的 dUTP，最後以 DAB 成色或螢光顯微鏡觀察。

✓ 應用: Fluorescence microscopy

✓ 反應時間: 90-100分鐘

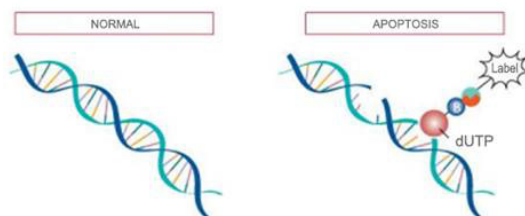

貨號	產品名稱	dUTP	20T		50T		100T	
			定價	優惠價	定價	優惠價	定價	優惠價
E-CK-A331	TUNEL Assay Kit (HRP-DAB)	Biotin-dUTP						
E-CK-A334	TUNEL Assay Kit (Enhance FITC)	FITC-dUTP (490/530 nm)	13,500	8,900	27,000	17,800	43,200	28,500
E-CK-A335	TUNEL Assay Kit (Enhance TMR Red)	TMR Red-dUTP (540/580 nm)						


*套組中含有 TdT Equilibration Buffer, TdT Enzyme, Proteinase K (50 ×) 和修飾的 dUTP，E-CK-A331 同時附有 DAB substrate。

✓ 應用：螢光免疫染色實驗中，以抗體標定上螢光後，加上 mounting medium 覆蓋住組織或細胞，才蓋上蓋玻片，最後以螢光顯微鏡觀察螢光。可以避免樣本水分流失，以及保護螢光延長顯微鏡觀察和樣本保存時間。

✓ 優點：

- (1) 樣本 4°C 保存一年以上
- (2) 螢光保護效果優於他牌
- (3) 所有螢光皆有保護效果，包括 Cyanine-based 的螢光 (Cy3, Cy5)

螢光保護效果優於他牌

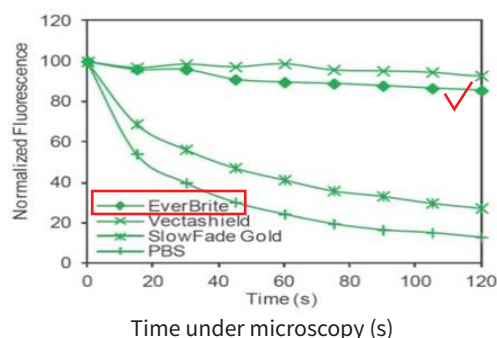

檢測四種不同 mounting medium 條件 (三家廠商 + PBS) 在螢光顯微鏡下對螢光 FITC 的保護效果。(FITC staining in HeLa cells) 以各自的初始時間 (t0) 為基準 (100%)，在螢光顯微鏡下照射120秒，每15秒觀察螢光衰退情形。Biotium Everbrite 比起 SlowFade Gold 螢光保護效果更好。



三合一大禮包

原價\$14,640，優惠價 **\$9,900**

1. 螢光染色封片膠一瓶 10mL mounting medium (#23001-23004, 23008-23009 六選一)
2. 玻片封片指甲油一瓶 15mL CoverGrip Coverslip Sealant (#23005)
3. 疏水性筆一枝 SuperHT PAP Pen Mini (#22005)

Mounting medium 訂購資訊

應用	產品名稱	DAPI	包裝	貨號	定價	優惠價
Wet-set	EverBrite™ Mounting Medium	W/O DAPI	10 mL	#23001	7,900	5,530
		With DAPI	10 mL	#23002	8,900	6,230
Harden (24 hours)	EverBrite™ Hardset Mounting Medium	W/O DAPI	10 mL	#23003	8,900	6,230
		With DAPI	10 mL	#23004	10,000	7,000
Wet-set (dropper bottle)	Drop-n-Stain EverBrite™ Mounting Medium	W/O DAPI	2 mL	#23008-T	2,000	1,400
		W/O DAPI	10 mL	#23008	8,000	5,600
		With DAPI	2 mL	#23009-T	2,400	1,680
		With DAPI	10 mL	#23009	9,300	6,510

其他相關產品

應用	產品名稱	包裝	貨號	優惠價
玻片染色封片	CoverGrip™ Coverslip Sealant	15 mL	#23005	2,300
		100 mL	#23005-1	9,700
玻片染色實驗 中隔出疏水性區域	SuperHT PAP Pen Mini	2.5 mm	#22005	5,800
	SuperHT PAP Pen Regular	4 mm	#22006	8,100
細胞核染色	DAPI in H ₂ O, 10 mg/mL	1 mL	#40043	5,200
	Hoechst 33342, 10 mg/mL in H ₂ O	10 mL	#40046	11,200
細胞打洞	Permeabilization Buffer	100 mL	#22016	6,100
	Permeabilization and Blocking Buffer	100 mL	#22017	6,100



創新玻片封片指甲油：
CoverGrip™ Coverslip Sealant

- (1) 珍貴樣本不萎縮不浪費
- (2) 柑橘香味清新宜人

FoucsBio 由一群專業且超過35年合成開發經驗的頂尖團隊創立，不僅提供物美價廉的目錄產品，更可以提供全客製化合成服務，製作專屬您的化合物。

所有產品通通**8折** (不限以下暢銷排行)
不論包裝，凡購買**三項**產品，
再加碼送**一張**抽獎券 (六項送兩張，依此類推)

客製化合成服務

找不到產品購買嗎？

只需要提供化合物結構式，由專業的技術人員為您設計所有合成步驟！

歡迎來電詢問！

目錄產品暢銷排行榜

類別	貨號	產品名稱	說明	包裝	售價
Cancer	10-1459	2-NBD-Glucose	Glucose uptake probe	1 mg	5,000
	10-4130	C-176	STING antagonist	10 mg	2,500
	10-4132	H-151	STING antagonist	10 mg	2,250
	10-1089	Nafamostat Mesylate	Serine protease inhibitor	10 mg	3,500
	10-4511	Ruxolitinib	JAK inhibitor	5 mg	4,500
	10-2520	SU-5402	FGFR Phosphorylation inhibitor	5 mg	3,000
	10-2824	Thiamet-G	O-GlcNAcase alpha 1 antagonist	5 mg	5,000
Cancer/ Immunology	10-4965	GRL-0617	Potent SARS-CoV Plpro inhibitor	5 mg	4,000
	10-2860	Kifunensine	Mannosidase inhibitor	1 mg	2,000
	10-1074	Ko-143	BCRP inhibitor	5 mg	3,250
	10-2254	Latrunculin A	Inhibits actin polymerization and microfilament organization	100 ug	4,900
Cancer/ Metabolism	10-4633	Nitazoxanide	Antiviral and antiparasitic agent	10 mg	2,000
	10-4622	Purmorphamine	Smoothed activator	5 mg	3,500
	10-4603	R162	Glutamate Dehydrogenase 1 inhibitor	10 mg	3,500
	10-4676	R428	Potent and selective AXL inhibitor	5 mg	3,000
Inflammation	10-4558	MF-438	SCD1 inhibitor	5 mg	2,000
Metabolism	10-1279	CHIR-99021	GSK3 β inhibitor	5 mg	3,500
	10-1450	CL-316243	β 3-adrenergic agonist / antiobesity	5 mg	2,250
	10-4861	GSK872	Necroptosis inhibitor / RIP3 inhibitor	5 mg	4,000
	10-4757	Ibrutinib	BTK inhibitor	10 mg	2,000
SARS-CoV-2	10-1590	YM-254890	Gq inhibitor	100 ug	2,000
	10-2794	5-Ethynyl-2'-deoxyuridine	DNA labeling	50 mg	3,250
	10-4604	SHP099	SHP2 inhibitor	5 mg	4,750
Stem Cells	10-4544	7-Cl-O-Nec1	Rip1 blocker	5 mg	3,500
	10-1329	C16	PKR inhibitor	5 mg	3,000
	10-2825	DMAPT	NF κ B inhibitor	5 mg	2,500
	10-2676	DMXAA	Mouse STING activator	5 mg	2,750
	10-4577	FSG67	GPAT inhibitor	10 mg	3,000
	10-1311	MLN4924	Nedd8 activating enzyme inhibitor	1 mg	2,750
	10-2443	SB-431542	ALK4,5 and 7 inhibitor	5 mg	2,500
	10-1186	XAV-939	Tankyrase inhibitor, Cardiomyogenesis inducer	5 mg	3,500
Other	10-4131	C-178	STING antagonist	10 mg	3,750
	10-4556	CB-839	Glutaminase inhibitor	5 mg	2,000
	10-4514	DAPT	γ -secretase inhibitor	5 mg	4,500
	10-4502	DEPMPO	Spin trap	50 mg	2,000
	10-1434	GSK-417651A	TRPC3/6 blocker	10 mg	3,000
	10-4764	LDN-193189 HCl	Inhibitor of ALK2 and ALK3	5 mg	3,500
	10-2301	Y-27632 dihydrochloride	ROCK family kinase inhibitor	5 mg	4,500

*更多品項和包裝請洽詢當區業務。

數量有限，
要買要快！

Cavoy 年底出清破盤價

cavoy

Cavoy 電泳系統/轉漬槽組，全面**85折**



【CAVOY Mini P-4小型垂直電泳 兩片膠系統】

貨號	內容物
MP-8002E	搭配 0.75mm 厚玻片厚邊條與齒梳
MP-8003E	搭配 1.0 mm 厚玻片厚邊條與齒梳
MP-8006E	搭配 1.5 mm 厚玻片厚邊條與齒梳

【CAVOY Mini P-4小型垂直電泳 四片膠系統】

貨號	內容物
MP-8000E	搭配 0.75mm 厚玻片厚邊條與齒梳
MP-8001E	搭配 1.0 mm 厚玻片厚邊條與齒梳
MP-8005E	搭配 1.5 mm 厚玻片厚邊條與齒梳



【CAVOY Mini TBC 轉漬槽組】


貨號	內容物
MP-3030	Mini P-4 轉漬槽上蓋和下槽、轉漬槽電極架、 三明治夾板x2、海綿墊x4、冰盒、操作手冊

Cavoy 耗材，任選搭配**買3送1**



(以上為部分範例，詳細品項請洽詢當區業務)

快搭 蛋白分析 光速時光機!

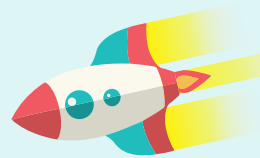

半天的實驗, 讓您 **1 小時** 解決!

時光機 第1站

Protein electrophoresis
20 mins

買 **38,500** 送 **22,200**

【買】10盒 ▶

SurePAGE Gel



【送】兩片膠電泳系統
一組 (市價22,200元) ▼



時光機 第2站

Staining
10 mins



eStain

~~原價 \$250,000~~

現在只要 **\$180,000**

再加送 **2組** 耗材!

時光機 第3站

Transfer
9-17 mins



eBlot

~~原價 \$250,000~~

現在只要 **\$180,000**

再加送 **2組** 耗材!

eStain™ L1 Protein Staining 全自動蛋白質染色儀


應用 快速蛋白質膠染色

優點

- (1) 反應快速只要10分鐘
- (2) 全自動化操作，確保每次條件相同，重複性高
- (3) 試劑自動注入吸出，乾乾淨淨又安全
- (4) 高靈敏度，可到12.5 ng 蛋白質
- (5) 一次兩片，可分開操作
- (6) 所有膠體種類皆可使用




高靈敏度 (12.5 ng)

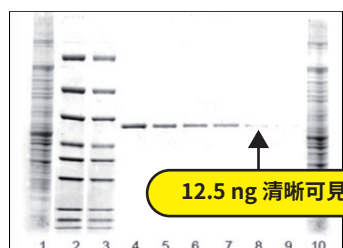

以不同蛋白質樣本跑電泳後，以 eStain™ 染色9分30秒。
1. E.coli cell lysate; 2, 3. Protein ladder, 5/2.5 μ l (GenScript, MM1397-500); 4-9. BSA 200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25 ng; 10. E.coli cell lysate

高重複性、染色均勻

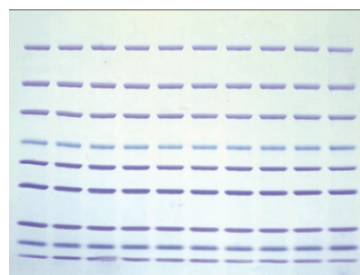

以 PAGE-MASTER Protein Standard Plus, 5 μ l (GenScript, MM1397-500) 跑電泳後，以 eStain™ 染色9分30秒。

eBlot™ L1 Transfer System 全溼式快速WB轉漬儀

應用 快速蛋白質轉漬 Transfer

優點

- (1) 反應快速只要9-17分鐘
- (2) 適用性廣，大小分子都包辦
- (3) 轉漬效率市面上最強，贏過其他競爭品牌
- (4) 全自動化操作，確保每次條件相同，重複性高
- (5) 試劑自動注入吸出，乾乾淨淨又安全
- (6) 一次兩片，可分開操作
- (7) 所有膠體種類皆可使用




	Wet Transfer	T牌 iBlot	B牌 Turbo	eBlot® L1
EGFR (170 KD)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Taq (93 KD)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
GAPDH (36 KD)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

勝!

比較四種轉漬系統，eBlot 效果最棒。
EGFR 蛋白質上樣量為 20, 10, 5, 2.5, 1.25 μ g
Taq 蛋白質上樣量為 125, 62.5, 31.2, 15.6, 7.8 ng
GAPDH 蛋白質上樣量為 10, 5, 2.5, 1.25, 0.25 μ g

國外客戶分享 **極致體驗**

Dr. Antoni Barriento 感謝 eBlot
成功轉漬 1200 kD 蛋白，只要20分鐘

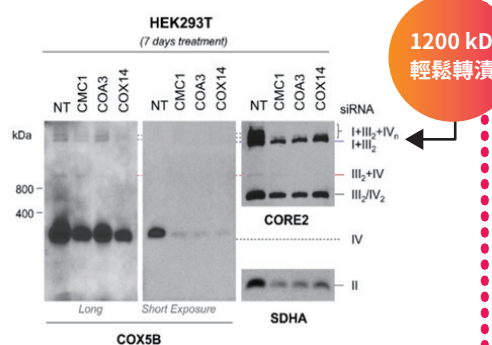

精美獎品任你抽!

頭獎



價值**3萬元**，
神秘大獎!

共1名

二獎



小烏龜的體積、高轉速的功能
12,500 RPM (9,800G)
價值**28,000元**

【Gusto Mini Centrifuge】

共2名

三獎



價值**7,000元**，
神秘大獎!

共1名

四獎



【創見1TB防震硬碟】

共3名

五獎



【小米 AI 音箱】

共2名

六獎



【小米行動電源高配版】

共1名

七獎



【威秀電影票】

共20名

普獎 1



【100元7-11 禮券】

共50名

普獎 2



【Haagen-Dazs兌換券】

共50名

[註1] 本期抽獎活動需於10/15下午5點前出貨且隨貨開立發票，同期傳單上之品項方能參與抽獎。10/31前於盟基官網公布中獎名單，獎品將於2021年1月底前統一送出。

抽獎券張數以活動期限內發票單號計算，不同發票之金額得合併計算。

[註2] 9/14~10/15購買本專刊商品，於10/15前出貨並隨貨開立發票者，滿1萬元則抽獎券雙倍贈，逾期恕不列入雙倍計算。

[註3] 抽獎方式為電子作業，恕不發放紙本抽獎券。

[註4] 僅此份促銷傳單上之商品/服務可列入抽獎累積金額，其他品項恕不列入。

[註5] 獎品顏色為隨機出貨。如遇獎品缺貨，盟基生技保留更換等值獎品之權利，恕不另行通知。

[註6] 本抽獎活動為區域限定：苗栗(含)以北區域。

