



活動時間：
即日起至12/30止

Everybody “抗”起來!

ANTIBODY/ELISA
年度精選,盡在盟基!

❶ 年度熱銷王!

Elabscience ELISA KitP.2

❷ IHC實驗掛保證!

Elabscience IHC Validated AntibodyP.5

❸ 螢光更勝AF!

Biotium CF dye螢光二抗P.7

高品質高穩定的 ELISA 套組

Elabscience®

熱銷**500**款，萬元有找！

Why Elabscience®?

- ✓ 高精準度: CV<10% (inter and intra)
- ✓ 高靈敏度: pg level
- ✓ 高專一性: Cross reactivity <10%
- ✓ 品管嚴謹: 100%自行研發與製造，全部資料可追溯
- ✓ 包裝彈性: 48T/96T/大批訂購

Elabscience
品質保證。
不滿意，
免費更換！



Elabscience®

► 榮登2021 CiteAb Awards
年度最值得推薦ELISA Kit供應商




TOP500 詳細品項
請掃描QR code

好還要更好! Elabscience 新推出兩種進階 ELISA kit

1 省時間新配方: QuicKey ELISA Kits

樣本和 detection antibody 一起加入(如右圖)，**省下1小時**，
完全不影響 sensitivity, specificity, accuracy and stability

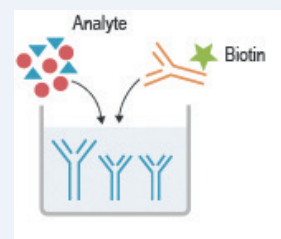

■ QuicKey ELISA Kits 比傳統 ELISA 更快速更方便

	Traditional ELISA	QuicKey ELISA
反應時間	3.5h	2.5h 勝
樣本體積	100 uL	50 uL
步驟	7 steps (抗體和樣本分開加入)	6 steps (抗體和樣本一起加入)
試劑儲存方式	部分 -20°C, 部分 4°C	全部 4°C

■ 產品資訊:

目前僅能針對以下蛋白，其他目標持續研發中

類別	偵測目標
Renal function biomarker	TF, NGAL, β 2-MG, MAU, RBP4, Cys-C, CLU
Inflammation biomarker	IgG, CRP, TGF- α , PCT, ALB, Acrp30, IgA, IgE, IgM, TG
Signal transduction	VEGF-A, TGF- α , Acrp30

2 高靈敏度新配方: CLIA kit (Chemiluminescent Immunoassay)

使用冷光 HRP substrate，靈敏度更升級，靈敏度為傳統 ELISA 的5倍，可到 10 pg/mL 等級，中間操作步驟完全相同。超過600種，任君挑選。

■ CLIA 靈敏度更高，舉例 Mouse TFF3

	Traditional ELISA	CLIA
貨號	E-EL-M1200	E-CL-M0666
偵測目標	Mouse TFF3(Trefoil Factor 3, Intestinal)	
反應時間	3.5h	
偵測方式	吸光值 (A450)	冷光 (RLU)
靈敏度	46.88 pg/mL	9.38 pg/mL 勝
終止反應	需加入 stop solution	不需要

*Elabscience 亦單獨販售 ELISA 套組中單一 Buffer，歡迎來電詢問。


Rabbit Monoclonal Antibody 兔單抗系列

Elabscience®

利用兔子的獨特免疫系統，擁有更大的B cell library，其B lymphocytes對於抗原具有更好的**特異性**和**辨識度**，更能區分細微的差異，例如：後修飾、抗原突變和構型變化等。


● 優勢

- ✓ 高親和力：即使歷經嚴苛實驗條件，依然不損失訊號強度
- ✓ 特異性高於小鼠單抗，可適用於大多數應用
- ✓ 單抗生產，抗體批次穩定，更好的一致性和重複性

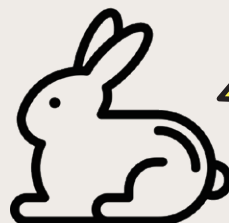


全面
66折

● Data實證

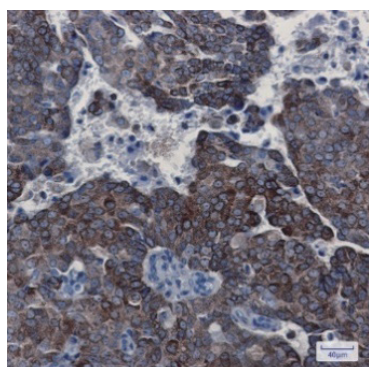


IHC Experiment

Immunohistochemistry of Bcl-2 in paraffin-embedded Human breast cancer tissue using Bcl-2 Rabbit mAb (E-AB-81425) at dilution 1:100.

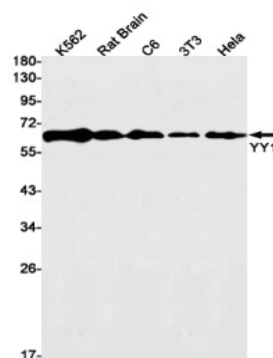

WB Experiment

Western Blot detection of Smad3 in Jurkat, C6, HeLa cell lysates using Smad3 Rabbit mAb (E-AB-81623) (1:1000 diluted).

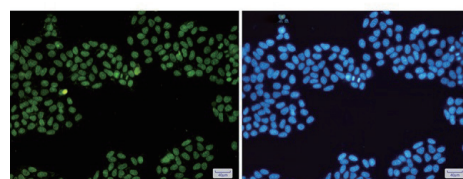

IF Experiment

Immunofluorescence of Topoisomerase I (green) in HeLa cells using Topoisomerase I Rabbit mAb (E-AB-81489) at dilution 1:200, and DAPI(blue).

Product Name	Applications	Reactivity	Target
Recombinant E Cadherin Monoclonal Antibody	WB, IHC-P, IF	Human	E Cadherin
Recombinant Bcl2 Monoclonal Antibody	WB, IHC-P	Human	Bcl2
Recombinant IKB alpha Monoclonal Antibody	WB	Human, Rat	IKB alpha
Recombinant ERK1/2 Monoclonal Antibody	WB	Human, Mouse, Rat	ERK1/2
Recombinant PI3 Kinase p85 alpha Monoclonal Antibody	WB, IF	Human, Rat, Hamster	PI3 Kinase p85 alpha
Recombinant Vimentin Monoclonal Antibody	WB, IHC-P, IF	Human, Mouse, Rat, Hamster	Vimentin
Recombinant TGF beta 1 Monoclonal Antibody	WB	Human, Mouse, Rat	TGF beta 1
Recombinant Caspase 3 Monoclonal Antibody	WB, IHC-P	Human, Mouse	Caspase 3
Recombinant p38 Monoclonal Antibody	WB	Human	p38
Recombinant Lamin A/C Monoclonal Antibody	WB, IHC-P	Human, Mouse	Lamin A/C

更多品項，歡迎來電洽詢

高規格一級抗體



● THE ELITE Antibodies 系列


1. 高專一性：皆為單株抗體
2. 高靈敏度：有效降低抗體用量
3. 高親和力：與抗原鍵結更緊密
4. 乾乾淨淨：有效的降低背景值
5. 適用性廣：各種應用方式皆做過確認
6. 品質穩定：批次間差異度低
7. 長期保存：凍乾粉末可保存長達2年

客製化抗體製備服務

GenScript 亦提供抗體客製化製備服務，可依照客戶需求製備專一性抗體，歡迎來電洽詢。

- (1) 實驗動物飼養管理雙認證
- (2) 交貨期超快
- (3) 獨家專利抗原分析

見證一 不同批號的抗體效果一致

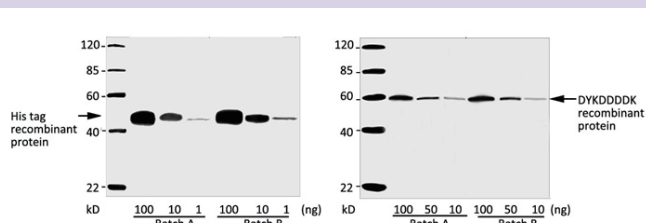


使用 Western blot 證明抗體批號間效果一致

(左) 使用不同批號的 THE™ His Tag Antibody (#A00186)

(右) 使用不同批號的 THE™ DYKDDDDK Antibody (#A00187)

見證二 靈敏度和專一性無可比擬

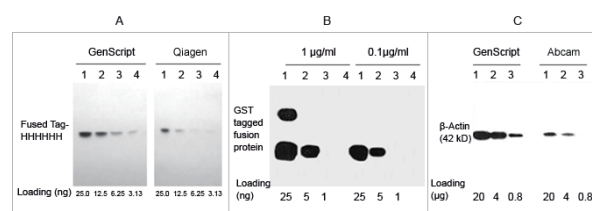

THE™ Elite antibodies 靈敏度超高，可減少抗體用量

(A圖) THE™ His Tag Antibody (#A00186) 比 Qiagen 抗體靈敏度更高

(B圖) THE™ GST Tag Antibody (#A00187) 可減少抗體用量

(C圖) THE™ Beta Actin Antibody (#A00702) 比 Abcam 抗體靈敏度更高

全面
7折



● 產品列表

分類	產品名稱	貨號	包裝
Epitope Tag & Cell Marker Antibodies	THE His Tag Antibody	A00186	100 ug
	THE c-Myc Tag Antibody	A00704	100 ug
	THE DYKDDDDK Tag Antibody	A00187	100 ug
	THE V5 Tag Antibody	A01724	100 ug
	THE Protein C Tag Antibody (HPC4)	A01774	100 ug
	THE NWSHPQFEK Tag Antibody	A01732	100 ug
	THE HA Tag Antibody	A01244	100 ug
	THE GST Antibody	A00865	100 ug
	THE GFP Antibody	A01704	100 ug
Loading Control Antibodies	THE alpha Tubulin Antibody	A01410	100 ug
	THE beta Actin Antibody	A00702	100 ug
Assay Antibodies	THE PEG Antibody	V00101	100 ug
	THE ADP Antibody	A01509	100 ug
	THE cAMP Antibody/cGMP Antibody	A01508	100 ug
	THE Phosphotyrosine Antibody	A01795	100 ug
	THE ADP Antibody, mAb, Mouse	A01799	100 ug
	THE™ Phosphotyrosine Antibody (E10)plus	A01819	100 ug

*另有 HRP, Biotin 和螢光修飾，歡迎來電洽詢

經驗證的一級抗體，保證有效

Elabscience®

Validated IHC Antibody IHC 免疫組織染色專用一級抗體

Ready-to-Use Antibodies 系列

產品應用

單株一抗 (unconjugated)，直接使用於 IHC (不能使用於 IF)！

產品優點

- (1) 多道程序，注重抗體的可驗證性和重複性
- (2) 所有抗體均經過免疫組織染色(IHC)實驗驗證
- (3) Elabscience結合第三方驗證單位的品管標準，給您雙重保障！




品質保證
不滿意，
免費更換！




查詢更多抗體

每支抗體皆經過免疫組織染色 (IHC) 確認過

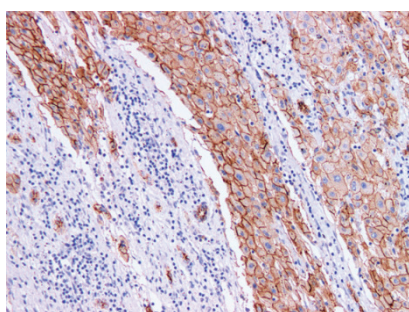

石蠟包埋的人類肝癌組織以 E-Cadherin Monoclonal Antibody (#PA6630) 染色。

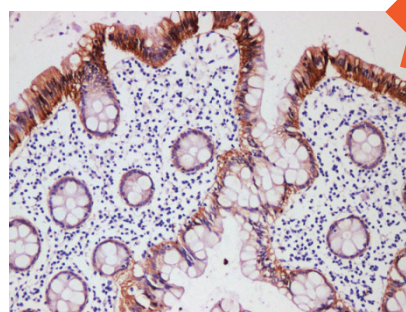

石蠟包埋的人類直腸平滑肌組織以 Beta-catenin Monoclonal Antibody (#PA6675) 染色。

IHC系列
66折

Flow Cytometry 專用一級抗體

● FCM Antibodies 系列 針對細胞膜表面蛋白

✓ 應用：螢光單株一抗，直接用於 Flow cytometry！

- ✓ 優點：
- (1) 多種螢光選擇
 - (2) 每支抗體皆經 Flow cytometry 確認過
 - (3) 多螢光實驗解析度高
 - (4) 解析度高於他牌
 - (5) 螢光標記效率高於他牌

10種螢光選擇、Biotin 鍵結以及未鍵結形式


Conjugates	Ex/Em (nm)	Conjugates	Ex/Em (nm)
FITC	490/530	PerCP/Cyanine5.5	440;480;675/690
AF488	495/520	PE/Cyanine5.5	495;565/690
PE	495;565/575	PE/Cyanine7	495;565/775
APC	650/660	APC/Cyanine7	650;760/775
AF647	650/670	Biotin	x
PE/Cyanine5	495;565;655/670	Unconjugated	x
PerCP	440;480;675/675	Azide Free/Low Endotoxin	x

FACS系列
66折

熱銷品項

物種	目標基因		
Human	CD3	CD4	CD8a
	CD19	CD25	FOXP3
Mouse	CD3	CD4	CD8a
	CD25	CD45	CD206
	F4/80	CD11b	IgG1, κ Isotype Control
Rat	CD4	CD8a	

每支抗體皆經 Flow cytometry 確認過

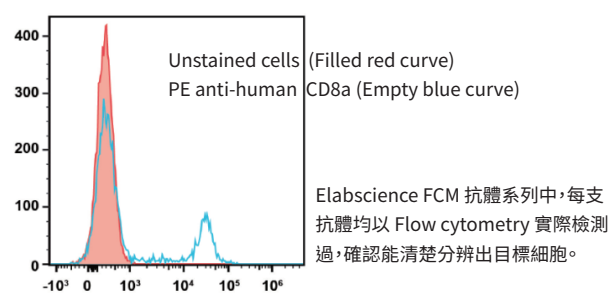

Elabscience FCM 抗體系列中，每支抗體均以 Flow cytometry 實際檢測過，確認能清楚分辨出目標細胞。

高規格一級抗體

● 嚴選特優 MonoRab 兔單株抗體

和小鼠單株比較有以下優點：

1. 兔子免疫性較高：可針對特殊的抗原，如小分子、小鼠同源性高的蛋白、經過後轉譯修飾的蛋白、nanobody 等
2. 靈敏度較高：可以減少用量
3. 專一性更高：降低背景值
4. 親和力更高：Picomolar KD values (10^{-11} M)
5. 穩定性更高：兔子抗體具有特殊結構使其更穩定

Antibody Target

Tag	DYKDDDDK、HA、His
Loading control	beta Actin
Others	Anti-Idiotypic、FITC、Human MSH6 Human PD-L1、Ractopamine


GenScript 亦提供 Rabbit Monoclonal Ab 客製化服務

Rabbit monoclonal antibodies應用重點：

1. 研發 – antibody for IHC procedure
2. 診斷 – IVD; in vivo imaging
3. Anti-idiotypic antibody –
 - PK studies
 - immunogenic assay;
 - vaccine development
4. 治療性抗體發展

歡迎聯絡我們評估!

實例：anti-ID Ab of Keytruda®

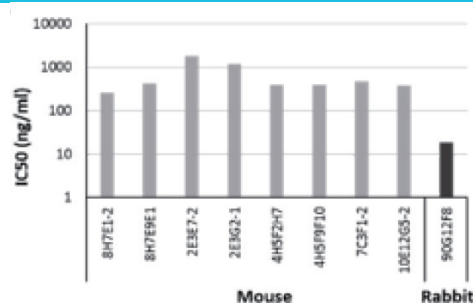

- 抑制中和抗體藥的效果明顯大於小鼠單抗
- 擁有 pico molar 等級的親和力 (KD value 2.32×10^{-12})

高品質 Isotype Control

應用於 Flow cytometry, IF, IP, ChIP, WB 等抗體實驗，確認一抗的專一性

全面7折

貨號	品名	包裝	售價	優惠價
A02005	Guinea pig IgG control (Whole Molecule), Purified	1 mg	4,800	3,360
A01007	Mouse IgG control (Whole Molecule), Purified	1 mg	4,800	3,360
A01011	Mouse IgG1 control (Whole Molecule), Purified	1 mg	4,800	3,360
A02000	Mouse IgG2a control (Whole Molecule), Purified	1 mg	4,800	3,360
A01730	Mouse IgG2b control (Whole Molecule), Purified	1 mg	4,800	3,360
A01008	Rabbit IgG Control (Whole Molecule), Purified	4 mg	4,800	3,360
A02004	Rat IgG control (Whole Molecule), Purified	1 mg	4,800	3,360
A02022-200	MonoRab™ Rabbit IgG Control (Whole Molecule), mAb	200 µl	6,700	4,690
A02023-200	MonoRab™ Rabbit IgG Control [Biotin] (Whole Molecule), mAb	200 µl	6,700	4,690
A02024-200	MonoRab™ Rabbit IgG Control [FITC] (Whole Molecule), mAb	200 µl	6,700	4,690
A02025-200	MonoRab™ Rabbit IgG Control [PE] (Whole Molecule), mAb	200 µl	6,700	4,690
A02026-200	MonoRab™ Rabbit IgG Control [iFluor 647] (Whole Molecule), mAb	200 µl	6,700	4,690
A02028-200	MonoRab™ Rabbit IgG Control [iFluor 488] (Whole Molecule), mAb	200 µl	6,700	4,690
A02027-200	MonoRab™ Rabbit IgG Control [iFluor 555] (Whole Molecule), mAb	200 µl	6,700	4,690

跨時代的 CF[®] Dyes 螢光二抗



Secondary Antibodies


應用：免疫螢光染色、Flow cytometry、螢光 Western-blotting

針對市面螢光染劑大幅改良，有以下優點：

1. 超過30種螢光選擇
2. 螢光強度更高：優於 Alexa Fluor 染劑
3. 背景值更低：CF[®] dye 負電荷較 Alexa Fluor[®], DyLight[®] and IRDyes[®]少，因此染劑對細胞的非專一性吸附較少，也不影響抗體等電點。
4. 穩定性更高：長時間照射不失活性，更適合顯微鏡觀察。
5. 酸鹼耐受性更高：耐受 pH 2至pH 11



穩定性高於 Alexa Fluor[®]

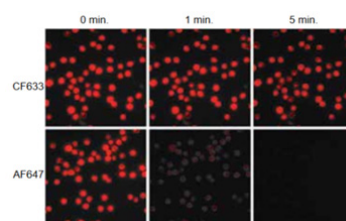

Jurkat 細胞固定打洞後，一抗為 rabbit anti-CD3 Ab，再使用 CF633 or Alexa Fluor 647 (AF647) 標記的二抗。以 mercury arc lamp 照射不同時間觀察紀錄。

產品名稱	Conjugation	貨號	包裝	優惠價
Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) / Goat Anti-Mouse IgG (H+L)	CF [®] v 350	20141/20140	50 µl/500 µl/1 mg	全系列 優惠中 掃描QR Code 
	CF [®] 405S	20082/20080		
	CF [®] 405M	20181/20180		
	CF [®] 405L	20409/20408		
	CF [®] 488A	20012/20010		
	CF [®] 514	20387/20386		
	CF [®] 532	20366/20365		
	CF [®] 543	20309/20306		
	CF [®] 555	20033/20030		
	CF [®] 568	20102/20100		
	CF [®] 594	20112/20110		
	CF [®] 633	20122/20120		
	CF [®] 640R	20202/20197		
	CF [®] 647	20043/20040		
	CF [®] 660C	20053/20050		
	CF [®] 660R	20055/20054		
	CF [®] 750	20073/20070		
	CF [®] 790	20379/20378	50 µl	
	APC	20412/20411	100 µl/500 µl	
	R-PE	20353/20352	200 µl/1 ml	
	Alkaline Phosphate	20465/20464	100 µl/1 ml	
	Biotin	20185/20183	50 µl/500 µl/1 mg	
	HRP	20402/20400	100 µl/1 mg/1 ml	


輕輕壓一滴，完成螢光二抗實驗



Drop-n-stain

應用: Western-blotting、免疫螢光染色和免疫組織學染色、Flow cytometry

- ✓ 方便的滴管瓶，無需移液即可輕鬆分配
- ✓ 提供 4 種明亮且穩定的 CF® dye 種類
- ✓ 高度交叉吸附(已吸附牛、雞、山羊、豚鼠、敘利亞倉鼠、馬、人、兔和綿羊血清)
 - 以最小背景進行特定染色
- ✓ 使用方式: 螢光顯微鏡實驗: 添加兩滴至 1 mL 抗體實驗 buffer。
- ✓ 流式細胞儀實驗: 每 10⁶ 顆細胞/滴

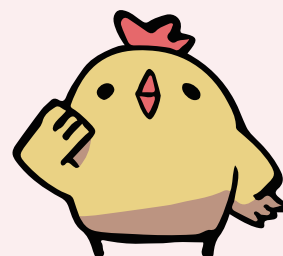


訂購資訊


貨號	品名	包裝	螢光	優惠價
20950	Drop-n-Stain™ CF®488A Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed	5 mL	CF488A	全系列優惠中 掃描QR Code 
20951	Drop-n-Stain™ CF®594 Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF594	
20952	Drop-n-Stain™ CF®488A Donkey Anti-Mouse IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF488A	
20953	Drop-n-Stain™ CF®594 Donkey Anti-Mouse IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF594	
20954	Drop-n-Stain™ CF®488A Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF488A	
20955	Drop-n-Stain™ CF®594 Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF594	
20956	Drop-n-Stain™ CF®488A Goat Anti-Mouse IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF488A	
20957	Drop-n-Stain™ CF®594 Goat Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed		CF594	
20962	Drop-n-Stain™ CF®640R Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF640R	
20963	Drop-n-Stain™ CF®640R Donkey Anti-Mouse IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF640R	
20964	Drop-n-Stain™ CF®640R Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF640R	
20965	Drop-n-Stain™ CF®640R Goat Anti-Mouse IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF640R	
20966	Drop-n-Stain™ CF®543 Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF543	
20967	Drop-n-Stain™ CF®543 Donkey Anti-Mouse IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF543	
20968	Drop-n-Stain™ CF®543 Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF543	
20969	Drop-n-Stain™ CF®543 Goat Anti-Mouse IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF543	

超高解析顯微技術螢光二抗 – STORM Ab

為了要增加顯微鏡實驗定位的精準度，Degree of Labeling (DOL, 螢光分子結合抗體的程度) 必須接近於 1。
Biotium 提供一系列的 single-label 二抗，並且有多種螢光可供選擇。

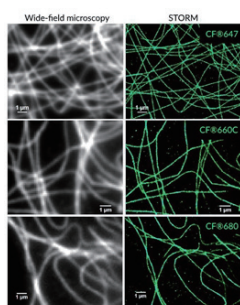

使用傳統顯微鏡(左圖)和新一代 STORM 技術(右圖)觀察細胞的微管蛋白 (microtubule)，皆使用 CF 螢光染料。可以看出 STORM 技術可以得到超高解析度的影像，可以更好地觀察目標。

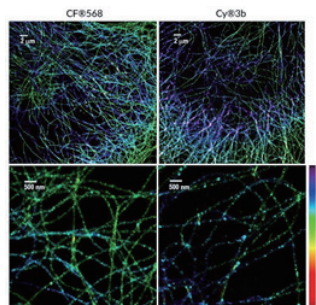

使用 3-D STORM 顯微鏡觀察 CF 568 (左圖) 和 Cy3b (右圖) 染料二抗辨認的微管蛋白，可以看出 CF568 染料的二抗有更好的螢光強度，影像更清晰。



多篇研究證明 CF dye 適合用於 STORM 實驗


抗體螢光標記套組

Mix-n-Stain™ CF® Dye Antibody Labeling Kits


非用不可的五大理由：

1. 大幅減少螢光免疫染色時間。
2. 共價鍵結非常穩定：螢光染劑不會擴散或轉移到其他抗體上，鍵結完的抗體可於4°C 保存半年。
3. 反應只要30分鐘 (酵素需要較長時間)
4. 不需要純化且背景值低：CF dye 水溶性超高，未鍵結的 CF dye 容易洗掉。
5. 可以忍受多種干擾物：包括 glycine、Tris、glycerol、sodium azide 和其他蛋白質。


應用於多螢光實驗

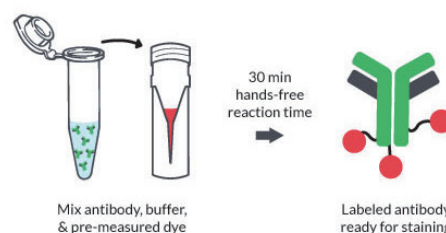

Mix-n-stain 標記一抗和螢光二抗效果相同

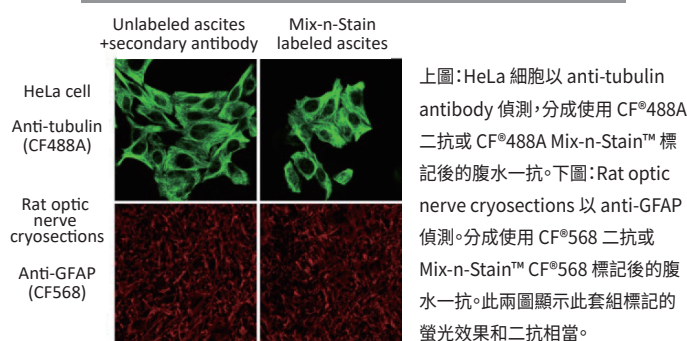

Mix-n-stain 標記效果遠勝 N 牌

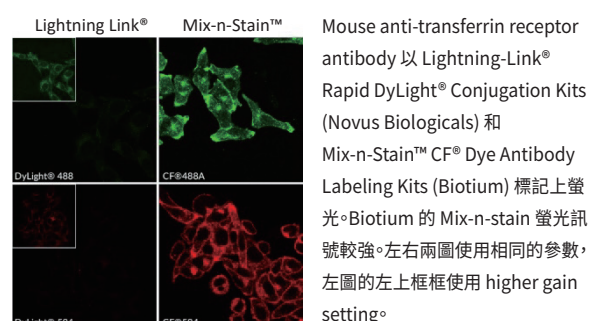

全面85折

(每個品項價格不同，歡迎來電詢問)

Label	Dye Ex/Em	Catalog for Labeling Antibody			
		5-20 ug	20-50 ug	50-100 ug	3x(5-20 ug)
CF®350	347/448 nm	92270	92250	92230	x
CF®405S	404/431 nm	92271	92251	92231	x
CF®405M	408/452 nm	92272	92252	92232	x
CF®405L	395/545 nm	92303	92304	92305	92445
CF®430	426/498 nm	92316	92317	92318	x
CF®440	440/515 nm	92319	92320	92321	x
CF®450	405/460 nm	92322	92323	92324	x
CF®488A	490/515 nm	92273	92253	92233	92446
CF®514	516/548 nm	92331	92332	92333	x
CF®532	527/558 nm	92289	92290	92291	x
CF®543	541/560 nm	92287	92267	92247	x
CF®555	555/565 nm	92274	92254	92234	x
CF®568	562/583 nm	92275	92255	92235	92447
CF®570	568/591 nm	92334	92335	92336	x
CF®583	583/606 nm	92237	92238	92239	x
CF®594	593/614 nm	92276	92256	92236	92448
CF®633	630/650 nm	92277	92257	92237	x
CF®640R	642/662 nm	92278	92258	92245	x
CF®647	650/665 nm	92279	92259	92238	92449
CF®660C	667/685 nm	92280	92260	92239	x
CF®660R	663/682 nm	92281	92261	92243	x

Label	Dye Ex/Em	Catalog for Labeling Antibody			
		5-20 ug	20-50 ug	50-100 ug	3x(5-20 ug)
CF®680	681/698 nm	92282	92262	92240	x
CF®680R	680/701 nm	92283	92263	92246	x
CF®700	695/720 nm	92425	92426	92427	x
CF®750	755/777 nm	92284	92264	92241	x
CF®770	770/797 nm	92285	92265	92242	x
CF®790	784/806 nm	92288	92268	92248	x
CF®800	797/816 nm	92428	92429	92430	x
CF®820	822/835 nm	92431	92432	92433	x
Cyanine 555	555/565 nm	92412	92413	92414	92415
Cyanine 647	650/665 nm	92416	92417	92418	x
FITC	494/518 nm	92294	92295	92296	92444
Biotin	x	92286	92266	92244	92450
DIG	x	92328	92329	92330	x
DNP	x	92325	92326	92327	x
Alkaline Phosphatase	x	x	92314 (25-50 ug)	92315	x
Glucose Oxidase	x	x	92312 (25-50 ug)	92313	x
HRP	x	92300 (10-20 ug)	92301 (25-50 ug)	92302	92451

Elabscience 提供高品質抗體，且精通所有抗體實驗，特別分享內部抗體實驗測試 Buffer，節省您配置的時間，且大幅提供實驗成功率。

所有產品任意搭配

2件88折、3件77折、4件66折

Elabscience ELISA 套組內容
大方分享，歡迎選購！！

一、酵素連結免疫吸附分析法 ELISA 專用 Buffer & 試劑

實驗應用	貨號	產品名稱	包裝	售價
Coating**	E-ELIR-001	ELISA Plate Coating Buffer(1 ×)	100mL	500
			1000mL	2,500
	E-ELIR-002	ELISA Plate Coating Buffer(5 ×)	100mL	2,000
			1000mL	6,000
Blocking	E-ELIR-003	ELISA Plate Blocking Buffer	100mL	1,750
			1000mL	5,500
Wash	E-ELIR-004	Wash Buffer for Sandwich-ELISA(25 ×)	100mL	500
			1000mL	2,500
	E-ELIR-005	Wash Buffer for Competitive-ELISA(25 ×)	100mL	500
			1000mL	2,500
TMB	E-IR-R201	One-component TMB Substrate	30mL	1,650
			100mL	4,000
			500mL	14,000
			1000mL	21,500
Stop	E-ELIR-006	Stop Solution	100mL	500
			1000mL	2,500
Sample	E-ELIR-011	Sample Diluent	100mL	1,000
			1000mL	5,000
Antibody	E-ELIR-007	HRP-conjugate Stabilizer	10mL	1,750
			100mL	5,500
			500mL	14,000
	E-ELIR-008	HRP-conjugate Diluent	100mL	1,000
			1000mL	5,000
	E-ELIR-009	Biotinylated Antibody Stabilizer	10mL	1,750
			100mL	5,500
			500mL	14,000
	E-ELIR-010	Biotinylated Antibody Diluent	100mL	1,000
			1000mL	5,000

HOT

HOT

* Elabscience 亦提供完整的 ELISA 套組，直接使用最方便，歡迎來電詢問。

** 盟基提供 ELISA 加速器：分子吸附超效儀 MAS (#SW-MAS-01)，coating 只要5-10分鐘，歡迎來電詢問。

二、組織免疫染色 IHC 專用 Buffer & 試劑

實驗應用	貨號	產品名稱	包裝	售價
Decalcification	E-IR-R112	EDTA Decalcification Solution	100mL	1,250
			500mL	4,000
			1000mL	7,500
Antigen retrieval	E-IR-R104	10× Antigen Retrieval Solution pH 9.0 for IHC	100mL	2,500
			500mL	8,250
			1000mL	15,000
	E-IR-R105	10× Antigen Retrieval Solution pH 6.0 for IHC	100mL	2,500
			500mL	8,250
			1000mL	15,000
	E-IR-R109	Proteinase K Reagent	1mL	1,000
			5mL	3,000
			10mL	5,000
Inactivation	E-IR-R115	Endogenous Peroxidase Blocking Buffer	10mL	750
			20mL	1,000
			50mL	1,500
Blocking	E-IR-R110	Normal Goat Serum (Ready-to-Use)	5mL	500
			10mL	750
			50mL	2,250
	E-IR-R111	10× Normal Goat Serum	5mL	750
			10mL	1,000
Chromogen	E-IR-R101	DAB Detection Kit (20×)	1mL	1,250
			3mL	2,500
			6mL	4,250
Nuclear Staining	E-IR-R120	Hematoxylin staining Buffer	5mL	1,250
			15mL	3,000
			50mL	8,500
HE Kit	E-IR-R117	HE staining Kit	10mL	1,750
			50mL	7,500
			100mL	12,000
Mounting	E-IR-R118	Neutral Balsam	5mL	1,000
			15mL	2,000
			50mL	5,000



三、抗體實驗通用 Buffer & 試劑

實驗應用	貨號	產品名稱	包裝	售價
Wash	E-BC-R335	TBST Buffer (10×)	100mL	500
			200mL	750
			500mL	1,000
Blocking	E-IR-R107	5% BSA Blocking Buffer	5mL	400
			10mL	500
			50mL	1,500
Permeabilization	E-IR-R122	Triton X-100	10mL	750
			50mL	2,000
			100mL	3,000
Dilution	E-IR-R106	Antibody Dilution Buffer	10mL	500
			50mL	1,500
			100mL	2,500



萌雞年末回饋 給您滿滿的活力!

單筆購買滿 6,000元 ※右欄禮品二選一	 OmicsBio Buffer (10XPBS, TBS, TGS, TG任選) x1	or	 Labo 抗酒精符號筆 (Ø2mm) x3
單筆購買滿 15,000元 ※右欄禮品二選一	 Labo 彩色標籤膠帶 (大卷) x2	or	 擦手紙一箱 (20包)
單筆購買滿 22,000元 ※右欄禮品二選一	 T-PRO Mycospray 黴菌菌去除清潔劑 (500mL) x1	or	 萌雞兌換券 (100元 x 6張)
單筆購買滿 30,000元 ※右欄禮品二選一	 Elabscience HRP二抗 (Goat anti-Rabbit or anti-Mouse任選一支) (#E-AB-1003 or E-AB-1008, 60uL)	or	 星巴克咖啡券 (150元 x 5張)
單筆購買滿 45,000元 ※右欄禮品二選一	 SurePAGE 蛋白質梯度膠 (貨號任選) x1	or	 良杯製所 吸管杯組 x1
單筆購買滿 50,000元 ※右欄禮品二選一	 Elabscience 細胞專用 Anti-Mycoplasma Treatment Reagent (200×) 1 m x5 (#EP-CM-L0503)	or	 萌雞兌換券 (100元 x 22張)
單筆購買滿 66,000元 ※右欄禮品二選一	 DLAB 小烏龜 (7000rpm) x1	or	 0.2µm PVDF轉漬膜 26cm x 3.3m, x1

Code:2022Q309-03

- 【註1】滿額贈獎資格者，須於活動截止日前完成出貨並隨或開立發票者，始符合資格。
 【註2】贈品為隨機出貨，如遇贈品缺貨，盟基生技保留更換等值贈品之權利，恕不另行通知。
 【註3】僅此份促銷傳單上之商品/服務可列入累積金額，其他品項恕不列入。
 【註4】滿額贈優惠方案擇一，不得累計。
 【註5】活動至12月30日止，贈品於隔年1月底前統一送出。

Omics Bio
盟基生物科技

Web: www.omicsbio.com.tw
 Mail: info@omicsbio.com
 免付費電話: 0800-222-082

台北總公司
 T : 02-8698-2268
 F : 02-8698-2228

高雄分公司
 T : 07-223-6080
 F : 07-223-8205

