

活動期間：即日起至4/30

生醫年會專刊

細胞株與ELISA kit篇

轉染試劑

細胞轉染試劑 Transfection Reagent

■ T-Pro NTR II (non-liposomal transfection reagent II) 非脂質體轉染試劑

(Cat No.:JT97-N002, 原價\$3,900, 特價\$3,510)

T-Pro
BIOTECHNOLOGY

細胞
實測效果

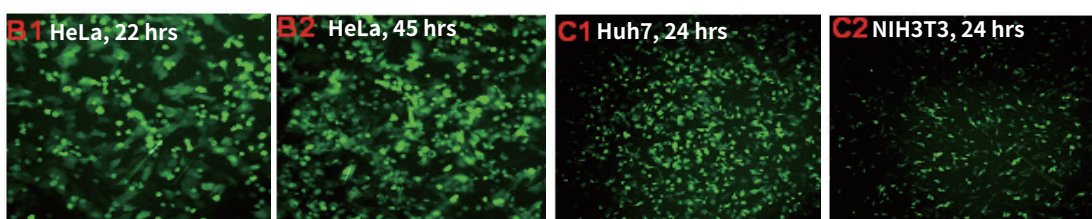


Figure B1 & B2

3ug DNA and 9ul "T-Pro Non-liposome transfection Reagent II (NTR II)"

Figure C1 & C2

5ug DNA and 15ul "T-Pro Non-liposome transfection Reagent II (NTR II)"

適用細胞：

HEK293, 293T, 293E, BHK, CHO, COS1, COS7, HeLa, Vero, PC3, L929, NIH 3T3, Sf9, Sf21, Human Foreskin Fibroblasts (HFF) primary cells, Bovine Aorta Endothelial cells (BAEC)

產品優點

(1)細胞毒性低 (2)出色的轉染效率 (3)步驟簡單

■ MaestroFectin™ Transfection Reagent (Cat No.:MF002, 原價\$10,300, 特價\$9,800/2x1 mL)

✓ 顆粒小、穿透性佳：Polymer-based設計，細胞毒性遠低於Liposome-Based試劑

✓ 超省錢：用量少，DNA/MaestroFectin= 1ug/1ul


✓ 步驟簡單：轉染後24hr內無須更換新的培養基

✓ Serum OK：可以與含血清培養基同步使用，不影響轉殖效率

✓ 多種細胞適用：適用於多種 tumor cell 以及 primary cells

Omics Bio
Always think your experiments step ahead

細胞
實測效果

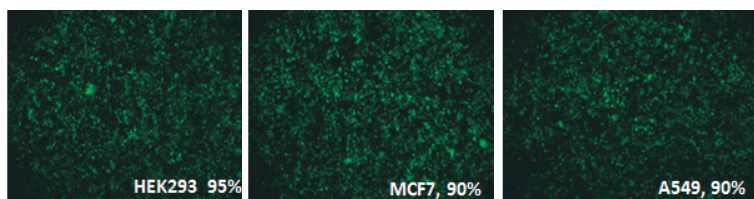

單次購買5組：
\$8,500/組
單次購買10組：
\$8,000/組

No.	Cell Line	Result	No.	Cell Line	Result	No.	Cell Line	Result	No.	Cell Line	Result
1	A549	++++	17	HCT-8	++++	33	MCF-10A ras	++++(++)	49	SNJ16	++(+++)
2	AGS	++++	18	HEC-1-A	++++(++)	34	MCF-7	++++(++++)	50	SNJ-620	++(++)
3	Bend 3	++	19	HeLa	++(+++)	35	MG-63	++++	51	SW480	++
4	BV-2	+++	20	Hep3B	++++	36	NCI-H1299	+++	52	T274	++
5	C2C12	+	21	HePa1c1c	+++(+)	37	NCI-H596	+	53	TCCSUP	+
6	C3H/10T1/2	++(++)	22	HepG2	+++	38	NIH-3T3	+++	54	U251	+++(+)
7	C-6+	+++	23	HL-60	++	39	P388D1	+	55	U373	++++
8	Calu-3	++	24	HT-29	+++	40	PC-12	+++	56	UMUC3	++++
9	Chang	++(+)	25	Huh-7	++(+++)	41	PC-3	++++(++++)	57	W38VA13	+++
10	CHO	++++(++++)	26	HUVEC	+	42	PT-697(48hl)	+++	58	293+	+++
11	Cos-1	+++	27	IMCD	++++(++++)	43	Raw264.7	+(+)	59	253J	+++(+)
12	DG44	++++(++)	28	J82+	++(+++)	44	RBL-2H3	++	60	Human Mesenchymal Stem Cell	++
13	EJ	++++(+++)	29	Jurkat	++++	45	RIE1	+++(+)	61	Primary Adipocyte	++
14	H-4-II-E	++	30	L929	++++(++++)	46	SH-SY5Y	++(+)	62	Primary Rat Chromaffin Cell	+
15	H9C2	++(+)	31	MC-3T3_E1	+	47	SiHa	++++	63	Primary Normal N92	+++(+)
16	HaCAT	++(+)	32	MCF-10A	++++(++++)	48	SK-OV-3	+++			

+: Low, ++: Medium, +++: Good, ++++: Excellence, (): 5-10% serum included

Code:2023Q102-03

Omics Bio
盟基生物科技

Web: www.omicsbio.com.tw
Mail: info@omicsbio.com
免付費電話: 0800-222-082

台北總公司
T : 02-8698-2268
F : 02-8698-2228

高雄分公司
T : 07-223-6080
F : 07-223-8205

官網

ID : @omicsbio



工欲善其事，必先利其器！何不從起始材料：細胞株著手呢？

全面9折

Elabscience®

Primary cells 初代細胞株

介紹 為直接從活體組織分離取得的細胞，具有最接近活體狀態的細胞型態和特性，代表活體中實際的分子作用機制，加強細胞株實驗可信度。

規格 1 vial, 5×10^5 細胞/ vial

- ✓ 現點現做，絕對新鮮：交貨期約一個月
- ✓ 附上說明書、COA 和細胞分離報告及免疫螢光鑑定報告與圖片，讓您清楚了解細胞來源和做比對參考。
- ✓ 免費提供一張免疫螢光鑑定報告：針對細胞的特性做染色，確認細胞身分。(需要原廠有抗體)

Cell line 穩定細胞株

介紹 學術使用穩定細胞株。

規格 2 vials, 1×10^6 細胞/vial

- ✓ 現貨最快一周到貨
- ✓ 超過300種細胞株可供選擇
- ✓ 人源細胞株附上 STR (short tandem repeat) 鑑定報告：讓您確認細胞身分，安心進行實驗，順利投稿期刊

Breast 乳癌細胞株

MCF7, HCC1937,
MDA-MB-231, SK-BR-3

Bone 骨癌細胞株

Saos-2, K562,
SW 1353, SH-SY5Y

Skin 皮膚癌細胞株

A-375, SK-MEL-1,
A-431

Liver 肝癌細胞株

Hep G2, HuH-7, LX-2,
SK-Hep-1

Kidney 腎癌細胞株

769-P, A-498, HK-2,
SK-NEP-1

Colon 大腸癌細胞株

Caco-2, DLD-1,
HCT 116, HT-29,
SW480

Uterus 子宮癌細胞株

HEC-1-A, Hela,
ME-180, SK-OV-3

Lung 肺癌細胞株

A549, NCI-H446,
Calu-3, SK-MES-1

Stomach 胃癌細胞株

MKN-7, SNU-1,
NCI-N87, HGC-27

Blood 血液細胞株

HAL-01, CA46,
U266B1

Pancreas 胰臟癌細胞株

BxPC-3, AsPC-1,
PANC-1, SW 1990

Prostate 前列腺癌細胞株

PC-3, 22RV1, DU 145,
WPMY-1



立即掃描QR code，
挑選您所需的細胞株

細胞培養相關試劑

Elabscience®

所有產品皆以0.22um filter
去除細菌，可直接用於細胞培養！

細胞培養

好康推薦

細胞凍存液 General Freezing Medium

① Ready to use ② 原廠優化配方 ③ 適合多數細胞凍存

貨號	包裝	原價	優惠價
EP-CM-L0457	10mL x 10	8,250 元	6,600 元



■ 細胞培養添加物 Cell culture additive

產品名稱	包裝	貨號	售價	優惠價
200mM L-Alanyl-L-Glutamine solution (100×)	100mL	EP-CM-L0060	1,000	800
200mM L-Glutamine Solution (100×)	100mL	EP-CM-L0061	500	400
200g/L D-Glucose Solution	100mL	EP-CM-L0459	1,000	800
100mM Sodium Pyruvate Solution (100×)	100mL	EP-CM-L0462	600	480
MEM Amino Acid Solution (50×)	100mL	EP-CM-L0464	1,000	800
MEM Non-Essential Amino Acid Solution (NEAA) (100×)	100mL	EP-CM-L0463	1,000	800
MEM Vitamine Solution (100×)	100mL	EP-CM-L0465	1,000	800
55mM β-Mercaptoethanol (1000×)	10mL	EP-CM-L0475	600	480
	100mL	EP-CM-L0475	3,000	2,400
10 mg/mL Recombinant Human Insulin Solution	1mL	EP-CM-L0478	1,250	1,000
	5mL	EP-CM-L0478	5,000	4,000

■ 其他細胞培養相關試劑 Other cell culture related reagents

應用	產品名稱	包裝	貨號	售價	優惠價
細胞計數	0.4% Trypan Blue Solution	100mL	EP-CM-L0483	750	600
細胞存活率	5 mg/mL MTT Solution	5mL	EP-CM-L0486	1,250	1,000
		10mL	EP-CM-L0486	2,250	1,800
Growth matrix	Poly-L-Lysine Solution (10×)	10mL	EP-CM-L0487	2,500	2,000
Detach cells	0.25% Trypsin Solution	100mL	EP-CM-L0043	600	480
	0.25% Trypsin Solution (With EDTA, Phenol Red, Dissolved In D-Hank's)	100mL	EP-CM-L0444	600	480
	0.02% EDTA Solution (Versene Solution)	100mL	EP-CM-L0447	500	400
抗菌	Penicillin-Streptomycin Solution (100×)	125mL	EP-CM-L0048	750	600
	Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Solution (100×)	125mL	EP-CM-L0449	900	720
抗真菌	250 µg/mL Amphotericin B Solution	10mL	EP-CM-L0455	800	640
Hybridoma 篩選	HAT Solution (50×)	10mL	EP-CM-L0472	1,750	1,400
	HT Solution (50×)	10mL	EP-CM-L0473	1,250	1,000

■ 細胞培養緩衝液 Cell culture buffer

產品名稱	包裝	貨號	售價	優惠價
1M HEPES Solution	100mL	EP-CM-L0005	1,500	1,200
7.5% NaHCO3 Solution	100mL	EP-CM-L0035	500	400
Phosphate Buffer (PBS)	500mL	EP-CM-L0006	500	400
Phosphate Buffer (PBS) (10×)	500mL	EP-CM-L0007	1,250	1,000
D-Hank's Balanced Salt Solution (D-HBSS), Without Calcium, Magnesium, Phenol Red	500mL	EP-CM-L0001	750	600
Dulbecco's Phosphate Buffer (DPBS), Without Calcium, Magnesium, Phenol Red	500mL	EP-CM-L0408	750	600
Dulbecco's Phosphate Buffer (DPBS), With Calcium, Magnesium, Without Phenol Red	500mL	EP-CM-L0410	750	600
Dulbecco's Phosphate Buffer (DPBS), With Calcium, Magnesium, sodium pyruvate, Glucose, Without Phenol Red	500mL	EP-CM-L0411	750	600
Dulbecco's Phosphate Buffer (DPBS), With Calcium, Magnesium, Phenol Red	500mL	EP-CM-L0409	750	600
Dulbecco's Phosphate Buffer (DPBS) (10×), Without Calcium, Magnesium, Phenol Red	500mL	EP-CM-L0414	1,250	1,000
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Without Calcium, Magnesium, Phenol Red	500mL	EP-CM-L0415	750	600
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), With Calcium, Magnesium, Without Phenol Red	500mL	EP-CM-L0417	750	600
Hank's Balanced Salt Solution (HBSS), With Calcium, Magnesium, Without Phenol Red	500mL	EP-CM-L0403	750	600

細胞凋亡相關產品 Cell Apoptosis-related products

方法	Annexin V apoptosis assay	Caspase assay	Mitochondrial membrane potential assay (JC-1)	TUNEL assay
偵測目標	Phosphatidylserine (PS)	Caspase activity	Mitochondrial membrane potential	Fragmented DNA
凋亡階段	Early → Late			
偵測方法	Flow cytometry, Fluorescence microscopy	ELISA reader (OD)	Flow cytometry, Fluorescence microscopy	Fluorescence microscopy
反應時間	15-20 mins	2-4 hours	15-20 mins	90-100 mins


Annexin V apoptosis assay

✓ 介紹: Annexin V 透過偵測 Phosphatidylserine (PS) 反應細胞凋亡的最早期, 有多種螢光選擇。

✓ 優點: 完整套組, 同時分析細胞凋亡和死細胞, 並且有多種螢光選擇。

✓ 應用: Flow cytometry

產品可依照 dead cell stain 做選擇

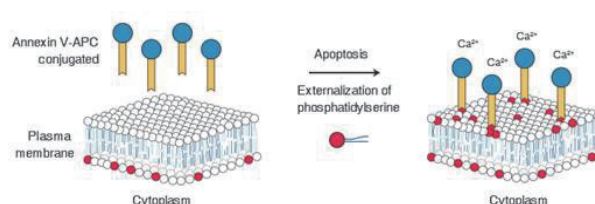

Elabscience®

全面
75折

貨號	Dead cell stain	產品名稱	Annexin-V conjugation 螢光
E-CK-A211	PI	Annexin V-FITC/PI Apoptosis Kit	FITC:490/530
E-CK-A213		Annexin V-Elab Fluor® 647/PI Apoptosis Kit	Elab Fluor® 647:650/670
E-CK-A217		Annexin V-APC/PI Apoptosis Kit	APC:650/660
E-CK-A219		Annexin V-EGFP/PI Apoptosis Kit	EGFP:488/510
E-CK-A221		Annexin V-Cyanine5/PI Apoptosis Kit	Cyanine5:650/670
E-CK-A229		Annexin V-APC/Cyanine7/PI Apoptosis Kit	APC/Cyanine7:650/760/780
E-CK-A233		Annexin V-Elab Fluor® Violet 450/PI Apoptosis Kit	Elab Fluor® Violet 450:410/450
E-CK-A235		Annexin V-Elab Fluor® Violet 500/PI Apoptosis Kit	Elab Fluor® Violet 500:425/500
E-CK-A237		Annexin V-Elab Fluor® 488/PI Apoptosis Kit	Elab Fluor® 488:495/520
E-CK-A239		Annexin V-Elab Fluor® Red 780/PI Apoptosis Kit	Elab Fluor® Red 780:625/765
E-CK-A212	7-AAD	Annexin V-FITC/7-AAD Apoptosis Kit	FITC:490/530
E-CK-A214		Annexin V-Elab Fluor® 647/7-AAD Apoptosis Kit	Elab Fluor® 647:650/670
E-CK-A216		Annexin V-PE/7-AAD Apoptosis Kit	APC:650/660
E-CK-A218		Annexin V-APC/7-AAD Apoptosis Kit	EGFP:488/510
E-CK-A220		Annexin V-EGFP/7-AAD Apoptosis Kit	Cyanine5:650/670
E-CK-A222		Annexin V-Cyanine5/7-AAD Apoptosis Kit	Elab Fluor® 647:650/670
E-CK-A228		Annexin V-PE/Cyanine7/7-AAD Apoptosis Kit	PE/Cyanine7:495/565/755/775
E-CK-A230		Annexin V-APC/Cyanine7/7-AAD Apoptosis Kit	APC/Cyanine7:650/760/780
E-CK-A234		Annexin V-Elab Fluor® Violet 450/7-AAD Apoptosis Kit	Elab Fluor® Violet 450:410/450
E-CK-A236		Annexin V-Elab Fluor® Violet 500/7-AAD Apoptosis Kit	Elab Fluor® Violet 500:425/500
E-CK-A238		Annexin V-Elab Fluor® 488/7-AAD Apoptosis Kit	Elab Fluor® 488:495/520
E-CK-A240		Annexin V-Elab Fluor® Red 780/7-AAD Apoptosis Kit	Elab Fluor® Red 780:625/765
E-CK-A252	DAPI	Annexin V-FITC/DAPI Apoptosis Kit	FITC:490/530
E-CK-A254		Annexin V-Elab Fluor® 647/DAPI Apoptosis Kit	Elab Fluor® 647:650/670
E-CK-A256		Annexin V-PE/DAPI Apoptosis Kit	PE:495/565/575
E-CK-A258		Annexin V-APC/DAPI Apoptosis Kit	APC:650/660
E-CK-A260		Annexin V-EGFP/DAPI Apoptosis Kit	EGFP:488/510
E-CK-A262		Annexin V-Cyanine5/DAPI Apoptosis Kit	Cyanine5:650/670
E-CK-A264		Annexin V-PE/Cyanine5/DAPI Apoptosis Kit	PE/Cyanine5:495/565/655/670
E-CK-A266		Annexin V-PE/Cyanine5.5/DAPI Apoptosis Kit	PE/Cyanine5.5:495/565/675/690
E-CK-A268		Annexin V-PE/Cyanine7/DAPI Apoptosis Kit	PE/Cyanine7:495/565/755/775
E-CK-A270		Annexin V-APC/Cyanine7/DAPI Apoptosis Kit	APC/Cyanine7:650/760/780
E-CK-A272		Annexin V-PE/Elab Fluor® 594/DAPI Apoptosis Kit	PE/Elab Fluor® 594:495/565/620
E-CK-A278		Annexin V-Elab Fluor® 488/DAPI Apoptosis Kit	Elab Fluor® 488:495/520
E-CK-A280		Annexin V-Elab Fluor® Red 780/DAPI Apoptosis Kit	Elab Fluor® Red 780:625/765

方法	Annexin V apoptosis assay	Caspase assay	Mitochondrial membrane potential assay (JC-1)	TUNEL assay
偵測目標	Phosphatidylserine (PS)	Caspase activity	Mitochondrial membrane potential	Fragmented DNA
凋亡階段	Early → Late			
偵測方法	Flow cytometry, Fluorescence microscopy	ELISA reader (OD)	Flow cytometry, Fluorescence microscopy	Fluorescence microscopy
反應時間	15-20 mins	2-4 hours	15-20 mins	90-100 mins



獨家研發 Caspase-3 enzyme substrate

NucView® Caspase-3 Enzyme Substrate




已被200多篇的文獻認證！可用於超過70多種的細胞株以及30多種初代細胞！

NucView® Caspase-3 Enzyme Substrate 為 Caspase-3 辨認切位 DEVD 接上 DNA 染劑，可穿過細胞膜進入細胞。當 DNA 染劑與 DEVD 相連時，無法進入細胞核，因此不發光。當 Caspase-3 活化後，會辨認並且切割 DEVD，造成 DNA 染劑進入細胞核內，結合 DNA 並發出綠色螢光。

【非用不可的七大理由】

1. 一劑兩用：同時偵測 **Caspase-3 活性** 及 **細胞核形態**。
2. 無細胞毒性：不干擾細胞凋亡，可**長時間**和**即時觀察**。
3. 操作簡單快速：直接添加，反應只需15-30分鐘。
4. 操作過程免沖洗，免離心：不傷害細胞，貼近真實情況。
5. 適用福馬林固定：染色後可固定和打洞。
6. 適用細胞範圍廣：可用於細胞株、初代細胞、懸浮性細胞以及3D培養細胞。
7. 觀察方式多元：適用 Fluorescence microscopy、Flow cytometry 與 Fluorescence plate reader。

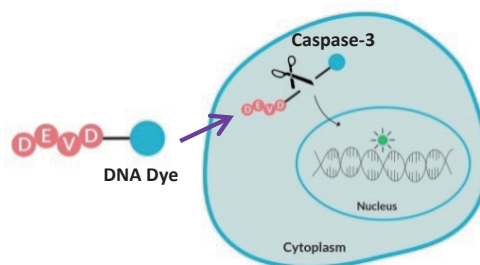

產品名稱	Ex/Em	貨號 (10 uL)		貨號 (100 uL)	
NucView® 405 Caspase-3 Substrate, 1 mM in DMSO	429/469 nm	10405-T	原價 3,750- 特價 3,188	10405	原價 18,650- 特價 15,853
NucView® 405 Caspase-3 Substrate, 1 mM in PBS		10407-T		10407	
NucView® 488 Caspase-3 Substrate, 1 mM in DMSO	500/530 nm	10402-T		10402	
NucView® 488 Caspase-3 Substrate, 1 mM in PBS		10403-T		10403	
NucView® 530 Caspase-3 Substrate, 1 mM in DMSO	528/563 nm	10406-T		10406	
NucView® 530 Caspase-3 Substrate, 1 mM in PBS		10408-T		10408	

Caspase assay

Elabsience®


✓ Caspase 激活後可以破壞一些重要的細胞內蛋白並誘導細胞凋亡。

✓ 優點：輕鬆偵測吸光值不須貴重儀器，可依照需求偵測三種不同 **caspase** 的活性。

✓ 應用：ELISA reader (OD450)

✓ 反應時間：2-4小時

機制示意圖：檢測 OD450 nm

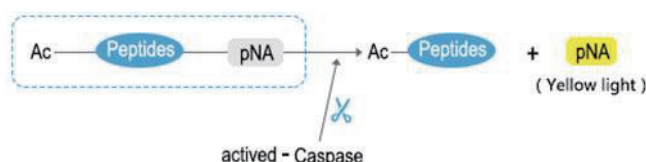

貨號	產品名稱	Target 序列	20T		50T		100T	
			定價	優惠價	定價	優惠價	定價	優惠價
E-CK-A311	Caspase 3 Activity Assay Kit (by Spectrophotometry)	DEVD	3,200	2,400	6,500	4,875	10,610	7,958
E-CK-A312	Caspase 8 Activity Assay Kit (by Spectrophotometry)	IETD						
E-CK-A313	Caspase 9 Activity Assay Kit (by Spectrophotometry)	LEHD						

*套組皆含有 Lysis Buffer, 2× Reaction Buffer, Ac-target sequences-pNA, DTT。

方法	Annexin V apoptosis assay	Caspase assay	Mitochondrial membrane potential assay (JC-1)	TUNEL assay
偵測目標	Phosphatidylserine (PS)	Caspase activity	Mitochondrial membrane potential	Fragmented DNA
凋亡階段	Early → Late			
偵測方法	Flow cytometry, Fluorescence microscopy	ELISA reader (OD)	Flow cytometry, Fluorescence microscopy	Flow cytometry, Fluorescence microscopy
反應時間	15-20 mins	2-4 hours	15-20 mins	90-100 mins

市場獨家

One-step TUNEL Apoptosis Kit


直接帶螢光，省去多餘的步驟

Elabscience®


✓ 介紹：當細胞發生凋亡時，DNA斷裂暴露出3'-OH則可以被末端脫氧核糖酸轉移酶(TdT)催化，標記上有螢光的dUTP，最終可以利用螢光顯微鏡或流式細胞儀檢測。

✓ 優點：高靈敏度、快速、簡單

✓ 應用：組織樣本和細胞原位凋亡檢測。

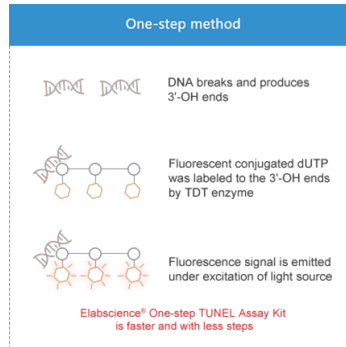

VS

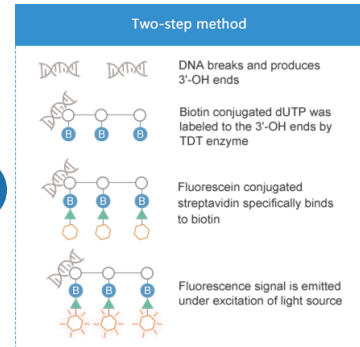


★ One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit

適用於各種組織樣本（石蠟切片、冷凍切片）和細胞樣本（細胞玻片）

產品效果展示(本次特別優惠品項)

One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Green, FITC)(Cat.No.:E-CK-A320)

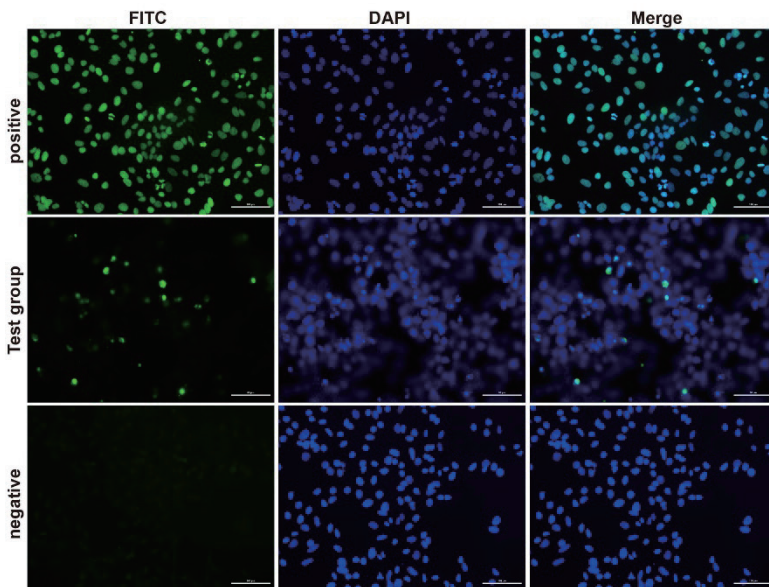


螢光染色訊號對比明顯。

Positive: 經DNase I處理的Hela cells

Test: 經Camptothecin誘導細胞凋亡的Hela cells

Negative: 只有buffer處理的Hela cells

與他牌染色效果比較

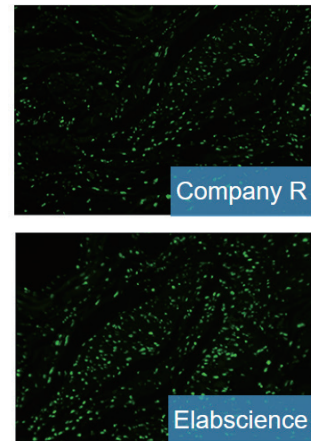

Elabscience® 產品的螢光染色效果優於Company R

產品資訊




貨號	產品名稱	Ex/Em	包裝	定價	優惠價
E-CK-A320	One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Green, FITC)	FITC: 495/525nm DAPI: 350/470nm	50T	13,857	5,500
			50T*2	23,157	9,150
E-CK-A321	One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Green, Elab Fluor® 488)	Elab Fluor® 488: 495/519nm DAPI: 350/470nm	50T	13,857	10,000
			100T	23,157	16,600
E-CK-A322	One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Red, Elab Fluor® 594)	Elab Fluor® 594: 590/617nm DAPI: 350/470nm	50T	13,857	10,000
			100T	23,157	16,600
E-CK-A324	One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Red, Elab Fluor® 647)	Elab Fluor® 647: 650/665nm DAPI: 350/470nm	50T	13,857	10,000
			100T	23,157	16,600
E-CK-A325	One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Red, Elab Fluor® 555)	Elab Fluor® 555: 555/565nm DAPI: 350/470nm	50T	13,857	10,000
			100T	23,157	16,600

★ One-step TUNEL Flow Cytometry Apoptosis Kit One-step TUNEL Flow Cytometry Apoptosis Kit

適用範圍廣：適用於多種懸浮細胞和貼壁細胞

產品效果展示(本次特別優惠品項)

One-step TUNEL Flow Cytometry Apoptosis Kit (Green, FITC)(Cat.No.:E-CK-A420)

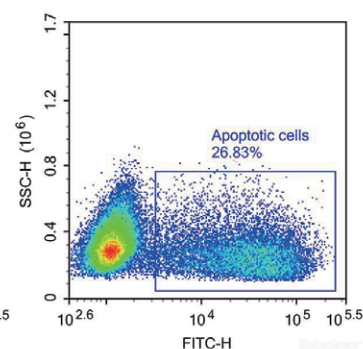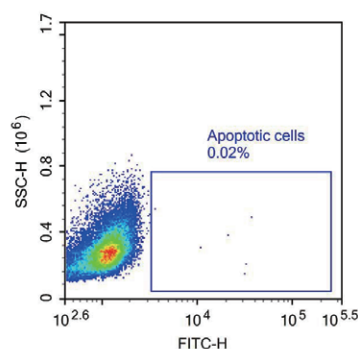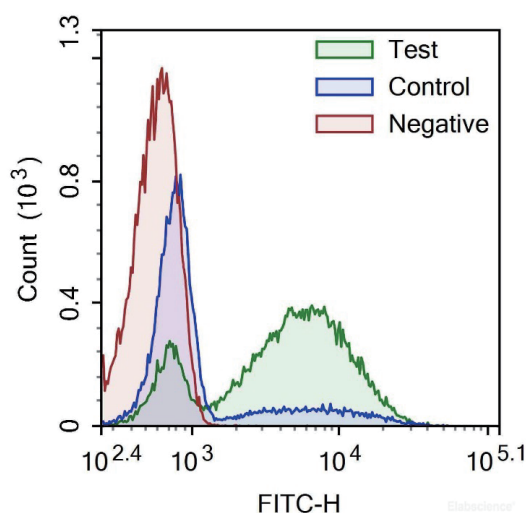

凋亡細胞染色效果優良。

Test: 經誘導細胞凋亡的HL-60 細胞

Control: 正常 HL-60 細胞

Negative: 經誘導細胞凋亡的HL-60 細胞(無加入TdT 酶)

Elabscience® 的產品群落分離明顯·分析效果佳。

Camptothecin誘導的 Jarket 細胞凋亡。

產品資訊

貨號	產品名稱	Ex/Em	包裝	定價	優惠價
E-CK-A420	One-step TUNEL Flow Cytometry Apoptosis Kit (Green, FITC)	FITC:495/525nm	50T	13,857	5,500
			50T*2	23,157	9,150
E-CK-A421	One-step TUNEL Flow Cytometry Apoptosis Kit (Green, Elab Fluor® 488)	Elab Fluor® 488: 495/519nm	50T	13,857	10,000
			100T	23,157	16,600
E-CK-A422	One-step TUNEL Flow Cytometry Apoptosis Kit (Red, Elab Fluor® 594)	Elab Fluor® 594: 590/617nm	50T	13,857	10,000
			100T	23,157	16,600
E-CK-A423	One-step TUNEL Flow Cytometry Apoptosis Kit(Blue, Elab Fluor® Violet 450)	EV450:410/450nm	50T	13,857	10,000
			100T	23,157	16,600
E-CK-A424	One-step TUNEL Flow Cytometry Apoptosis Kit (Red, Elab Fluor® 647)	Elab Fluor® 647: 650/665nm	50T	13,857	10,000
			100T	23,157	16,600
E-CK-A425	One-step TUNEL Flow Cytometry Apoptosis Kit (Red, Elab Fluor® 555)	Elab Fluor® 555: 555/565nm	50T	13,857	10,000
			100T	23,157	16,600

另外還有用於化學組織染色的TUNEL In Situ Apoptosis Kit (HRP-DAB Method) Cat.:E-CK-A331，一般光學顯微鏡也可以輕鬆做TUNEL檢測喔！

黴漿菌檢測 & 去除超值組

黴漿菌檢測

[優1] 操作超簡單：直接取細胞培養的上清液做反應，以電泳分析，**不需要純化 DNA**



[優2] 偵測範圍超廣：可偵測200種以上黴漿菌


[優3] 偵測超靈敏：只有10個黴漿菌/sample 也可以檢測到

[優4] 省時：反應小於2小時

[優5] 附上正控制組：確保實驗步驟正確以及無

PCR inhibitor 干擾

貨號	品名	包裝	售價
G238	PCR Mycoplasma Detection Kit	100 reactions	12,000

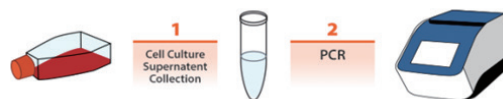

流程示意圖，僅需取細胞培養的上清液做 PCR 反應即可

黴漿菌去除

① 隨手一噴跟Mycoplasma說掰掰！針對多種細菌和病毒也有效！

貨號	品名	包裝	售價
JT90-R002	T-pro MycoClean Spray	500 mL	1,500


買4送1



Elabscience®

Anti-Nanobacteria Treatment Reagent (200×) 效果照片如下


#EP-CM-L0504

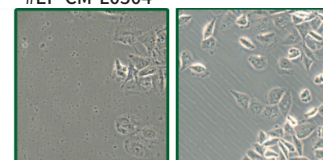

EJ細胞

處理前

處理後

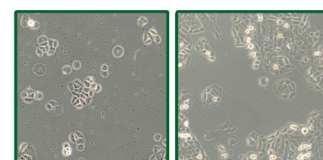

SiHa細胞

處理前

處理後

② 【細胞培養專用】清除Mycoplasma、Nanobacteria的小幫手

[優1] 本品經0.22μm過濾滅菌

[優2] 使用簡單：直接添加於細胞培養夜中，且不傷害細胞

[優3] 可用來清除、預防Mycoplasma或Nanobacteria：推薦稀釋比例為1:200


貨號	品名	包裝	售價	優惠價
EP-CM-L0503	Anti-Mycoplasma Treatment Reagent (200×)	1ml	1,500	1,200
		1x5 ml	5,600	4,480
EP-CM-L0504	Anti-Nanobacteria Treatment Reagent (200×)	1ml	1,500	1,200
		1x5 ml	5,600	4,480

水浴槽專用去水黴劑

[優1] 操作簡單：直接加入，維持乾淨的水浴槽 (500X 稀釋) 與水盤 (200X 稀釋)

[優2] 更換時機判斷簡單：當水從藍紫色轉成淺黃色時，代表需要更換

貨號	品名	包裝	售價	優惠價
JT90-R001S	T-Pro Aqua EZ Clean (S)	100 mL	1,500	1,350
JT90-R001M	T-Pro Aqua EZ Clean (M)	500 mL	5,250	4,725

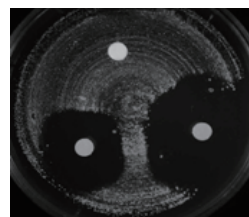

上方：控制組，僅有水；
左下方：500X稀釋；
右下方：200X稀釋。

觀察 Aqua EZ Clean 的抑菌作用

取水浴槽中的水至培養皿，將 Aqua EZ Clean 以不同比例加入至培養皿中，並於37°C培養箱培養72小時，觀察其變化。


提供最聰明的抗原修復試劑，讓繁瑣的實驗一步到位

一步快速脫蠟 One-step Rapid Dewaxing Solution

Elabsience®

無需進行傳統的3次xylene脫蠟、3~5次梯度EtOH水合作用，只需一種脫蠟液即可。有效縮短了操作時間，簡化了繁瑣的操作步驟，減少了操作中的變量，提高了穩定性。

告別傳統烏煙瘴氣的脫蠟方法，邁向清新的實驗環境

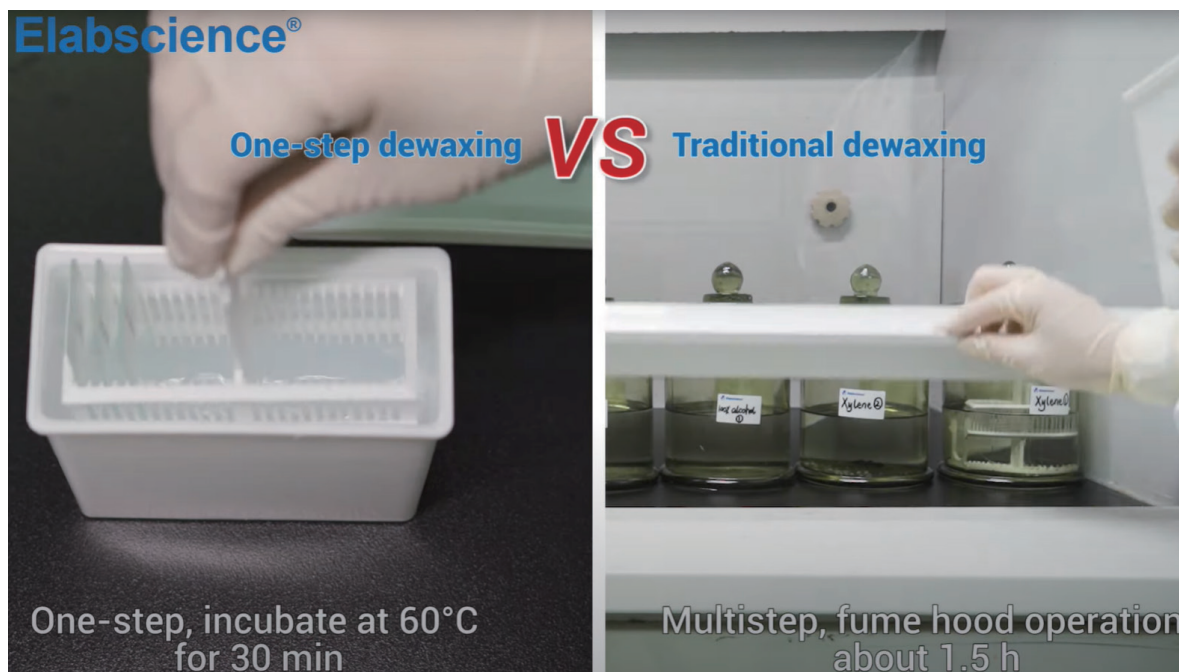

產品資訊

貨號	名稱	規格	儲存條件	售價	優惠價
E-CK-A032	One-step Rapid Dewaxing Solution	100 ml	RT(一年)	3,720	2,790
E-IR-R220A	One-step Dewaxing/Antigen Retrieval Buffer(pH9.0)	200 ml	2~8°C保存，避免冷凍，有效期為	5,580	4,185
E-IR-R221A	One-step Dewaxing/Antigen Retrieval Buffer(pH6.0)	500 ml	12 個月。試劑開封後6個月內有效。	9,300	6,975

Super Plus™ 高靈敏快速免疫組化試劑盒

- ✓ 檢測全程僅需3小時！告別繁瑣一盒搞定！
- ✓ 相關試劑一站式配齊，省時省力
- ✓ 無需進行3次xylene脫蠟、3~5次梯度EtOH水合作
- ✓ 脫蠟&修復只要一步驟，同步進行超省時

產品資訊

貨號	試劑名稱	規格	售價	優惠價
E-IR-R220	Super Plus™ High Sensitive and Rapid Immunohistochemical Kit (pH9.0)	3ml / 10ml	5,820	4,365
E-IR-R221	Super Plus™ High Sensitive and Rapid Immunohistochemical Kit (pH6.0)		15,200	11,400


抗原修復

細胞螢光染劑 Cellular stains



針對傳統染劑改良，專一性更高

1. 染劑種類齊全
2. 多種螢光可供選擇
3. 專一性提高：部分染劑不需清洗即可觀察
4. 染劑更穩定：大部分染劑可於染色後固定和打洞

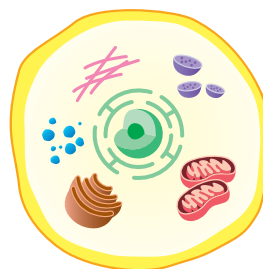

細胞部位	貨號	品名	特色	包裝
細胞核 DNA	40081-T/40081	NucSpot Live 488 (Green)	超低細胞毒性，非 UV 激發，不會發生 photoconversion，適合長期觀察，優於傳統染劑 DAPI & Hoechst。	10/50 uL
	40082-T/40082	NucSpot Live 650 (Far-red)		
	40060-T/40060	RedDot™1 Far-Red	螢光強度較強，非 UV 激發，但有輕微細胞毒性 (不能染色 fixed cells)。	25/250/1000 uL
	40083-T/40083	NucSpot® 470 (Green)	針對死細胞染色，不會發生 photoconversion。	20/200 uL
	40061-T/40061	RedDot™2 Far-Red		25/250/1000uL
細胞膜 Cell membrane	30021, 30022, 30023	CellBrite™ Cytoplasmic membrane dye (Green, Orange, Red)	可於染色後固定，也可固定後染色 (染色後不能打洞)。	1 mL
	30024	CellBrite™ Cytoplasmic membrane dye (Blue)		50 assays
	30070, 30077, 30078, 30079	CellBrite™ NIR Cytoplasmic membrane dye (NIR680, 750, 770, 790)		100 uL
	30090-T/30090	CellBrite™ Fix Membrane Stains (488 Green)	市面最強細胞膜染劑，可於染色後固定和打洞。兩者原理和用法略有不同，MemBrite 較多種螢光選擇，且背景值較低。	1/5 vial
	30088-T/30088, 30089T/30089	CellBrite™ Fix Membrane Stains (555 Red, 640 Far red)		1/5 vial
	30092-T~30104-T/30092~30104	MemBrite™ Fix Cell Surface Staining Kits (多種螢光選擇)		100/500 labeling
	30105-T/30105, 30106-T/30106, 30107-T/30107, 30108-T/30108, 30109-T/30109	CellBrite™ Steady Membrane Staining Kits (405 Blue, 488 Green, 550 Red, 650 Far red, 685 Near-IR)	細胞無毒，且可以長時間停留在細胞膜上 (24小時以上)，不像其他傳統染劑 (DiD, DiI, DiO) 容易被細胞內吞而消失。	100/500 labeling
細胞質 Cytoplasm	30068-T/30068	ViaFluor® SE Cell Proliferation Kits (405 Blue)	超低細胞毒性，為共價鍵結，適合觀察細胞分裂 (至多4代)	1/10 vial
	30086-T/30086	ViaFluor® SE Cell Proliferation Kits (488 Green)		
	30050	ViaFluor® CFSE Cell Proliferation Kit		1 kit
粒線體 Mitochondria	70070-T/70070, 70054-T/90054, 70055-T/70055,	MitoView™ Dyes (405 Blue, Green, 633 Far red, 650 Far red)	超低細胞毒性，適合長期觀察。633 和粒線體膜電位有關，可用來觀察細胞凋亡，Green和粒線體膜電位無關，適合固定後染色 (其他為部分相關，只能活染)	50/20x50 ug
	70075-50 ug/70075			
	70068-T/70068	MitoView™ Dyes (720 Near-IR)		
溶體 Lysosome	70066-T/70066, 70067-T/70067,	LysoView™ Dyes (405 Blue, 488 Green, 540 Red, 650 Far Red)	聚集在酸性的溶體中，同時此染劑也是 pH-sensitive (540 & 633)，大幅提高專一性，不須清洗即可觀察。專一性高於 Lyso Tracker Deed Red。	10/50 uL
	70061-T/70061, 70059-T/70059			
	70058-T/70058	LysoView™ Dyes (633 Far Red)		1/10 vial
脂肪油滴 Lipid droplet	70065-T/70065,	LipidSpot™ Lipid Droplet Stains (488 Green, 610 Far-red)	電中性染劑，可於染色後固定和打洞，不需清洗即可觀察。專一性高於 Nile Red 和 LipidTox Deep Red。	20/125 uL
	70069-T/70069			
細胞骨架 Cytoskeleton	70064-T/70064, 70062-T/70062, 70063-T/70063	ViaFluor® Live Cell Microtubule Stain (405 Blue, 488 Green, 647 Far-red)	活細胞染劑，可以觀看細胞分裂情況。	10/50 uL
	請來電詢問	Phalloidin CF Conjugates (超多種螢光)	只能於固定後染色，多種螢光可供選擇	50/300 U
神經終端 Nerve terminal	70020/70021	SynaptoGreen™ C4, SynaptoRed™ C2	特殊膜染劑，適合追蹤神經細胞終端的囊泡運輸過程。	5 mg 5 set
	70022/70027			
	70030	Nerve Terminal Staining Kit I	最新神經終端染劑搭配背景抑制劑： I: SynaptoGreen™ C4 + ADVASEP-7 III: SynaptoGreen™ C4 + Sulforhodamine 101 V: SynaptoRed™ C2 + ADVASEP-7	1 set
	70031	Nerve Terminal Staining Kit IIA		
	70031-1	Nerve Terminal Staining Kit IIB		
	70032	Nerve Terminal Staining Kit III		
	70034	Nerve Terminal Staining Kit V		

螢光染色封片膠




✓ 應用：螢光免疫染色實驗中，以抗體標定上螢光後，加上 mounting medium 覆蓋住組織或細胞，才蓋上蓋玻片，最後以螢光顯微鏡觀察螢光。可以避免樣本水分流失，以及保護螢光延長顯微鏡觀察和樣本保存時間。

✓ 優點：

- (1) 樣本 4°C 保存一年以上
- (2) 螢光保護效果優於他牌
- (3) 所有螢光皆有保護效果，包括 Cyanine-based 的螢光 (Cy3, Cy5)

螢光保護效果優於他牌

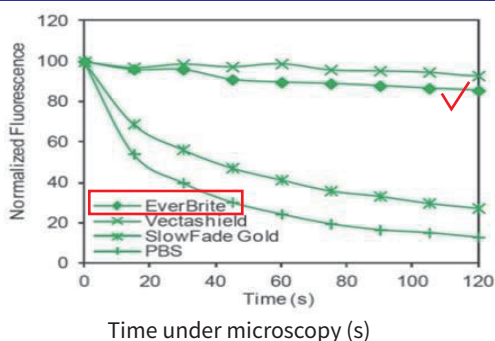

檢測四種不同 mounting medium 條件 (三家廠商 + PBS) 在螢光顯微鏡下對螢光 FITC 的保護效果。(FITC staining in HeLa cells) 以各自的初始時間 (t0) 為基準 (100%)，在螢光顯微鏡下照射120秒，每15秒觀察螢光衰退情形。Biotium Everbrite 比起 SlowFade Gold 螢光保護效果更好。

輕輕一滴，快速封片



Drop-n-Stain EverBrite™ Mounting Medium

Mounting medium 訂購資訊

應用	產品名稱	DAPI	包裝	貨號	定價	優惠價
Wet-set	EverBrite™ Mounting Medium	W/O DAPI	10 mL	23001	6,550	5,500
		With DAPI	10 mL	23002	7,350	5,500
Harden (24 hours)	EverBrite™ Hardset Mounting Medium	W/O DAPI	10 mL	23003	7,350	6,600
		With DAPI	10 mL	23004	8,300	6,600
Wet-set (dropper bottle)	Drop-n-Stain EverBrite™ Mounting Medium	W/O DAPI	2 mL	23008-T	1,650	1,403
		W/O DAPI	10 mL	23008	6,600	5,610
		With DAPI	2 mL	23009-T	1,950	1,658
		With DAPI	10 mL	23009	7,650	6,503

其他相關產品

應用	產品名稱	包裝	貨號	定價	優惠價
玻片染色封片	CoverGrip™ Coverslip Sealant	15 mL	23005	2,000	1,700
		100 mL	23005-1	8,500	7,268
玻片染色實驗 中隔出疏水性區域	SuperHT PAP Pen Mini	2.5 mm	22005	6,300	5,355
	SuperHT PAP Pen Regular	4 mm	22006	8,750	7,438
細胞核染色	DAPI in H ₂ O, 10 mg/mL	1 mL	40043	3,700	3,995
	DAPI	10 mg	40009	5,600	4,765
	DAPI, dilactate	10 mg	40011	5,550	4,718
	Hoechst 33342, 10 mg/mL in H ₂ O	10 mL	40046	10,350	8,798
	Hoechst 33342, trihydrochloride trihydrate	100 mg	40047	9,950	8,458
	Hoechst 33258, 10 mg/mL in H ₂ O	10 mL	40044	9,500	8,075
細胞打洞	Permeabilization Buffer	100 mL	22016	5,300	4,505
	Permeabilization and Blocking Buffer	100 mL	22017	5,300	4,505



創新玻片封片指甲油：
CoverGrip™ Coverslip Sealant

- (1) 珍貴樣本不萎縮不浪費
- (2) 柑橘香味清新宜人

卓越的代謝檢測套組， 幫助您輕鬆掌握細胞脈動

代謝檢測套組

相同的ELISA kit，不同的偵測標的



優勢

1. 多元偵測方式: 可依據相應的儀器, 選擇合適的試劑套組
2. 驗證的樣本類型多: serum、plasma、cultured cells、plant & animal tissue等, 不限物種。
3. 可提供售前樣本驗證服務
4. 提供樣本前處理試劑, 樣本處理更簡單
5. 絕佳再現性: intra-CV<5%, inter-CV<10%, recovery rate: 100±5%
6. 充分考慮預實驗消耗的試劑, 提供了足夠的試劑量, 保證可測數量
7. 指標覆蓋廣泛, 常見系列和特有指標, 滿足不同領域的需求
8. 穩定性高: 多數產品有效期可長達 6個月
9. 使用手冊詳細, 操作更方便: 50個樣本可於一小時內檢測完畢

全面
86折

Best Sellers of Metabolism Assay Kits

熱銷代謝指標一覽表

Ferroptosis	Liver biomarker	Enzyme	Amino acid protein	Inorganic salt ion	Oxidative stress	Plant stress resistance	Glycolysis & Carbohydrates	Lipid metabolism	Kidney biomarker
Fe ²⁺	ALT	SOD	T-AA	TIBC	MDA	Pro	LA	NEFA	UA
Fe	AST	GSH-ST	ALB	Zn	CAT	Plant Flavonoids	LDH	LPS	Cr
LPO	ALB	GSH-PX	Hyp	Fe	GSH	Total Phenols	G-6-PD	TC	Urea
GSH	TP	CAT	TP	Mg	VC	VE	Glu	TG	Oxalate
MDA	ALP	LDH	Hcy	Cl	VE	VC	ATP	TBA	
LDH cytotoxicity	TBA	CK	Pro	K	NO	PPO	Maltase	LDL-C	
	D-BIL	ALT	Cys	Cu	MPO	PAL	Glycogen	HDL-C	
	LDH	AST		Na	T-GSH/GSSG		Pyruvic Acid		
	GSH-ST	POD		Pi	H ₂ O ₂				
	γ-GT	ATPase		Ca	ROS				
	5'-NT	...			...				

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

★ 產品優勢

- ✓ 操作簡單，一瓶就搞定!
- ✓ 對細胞無毒性
- ✓ 高穩定度!於避光環境 4°C可保存兩年, -20°C可長時間保存
- ✓ 高靈敏度



★ 各細胞增生試劑比較表

特性	MTT	XTT	WST-1	CCK-8
溶解度	-	+	+	+
製劑形式	粉末,使用前溶解	2瓶溶液,使用前混合	1瓶溶液,直接使用	1瓶溶液,直接使用
靈敏度	+	++	++	+++
檢測速度	+	++	++	+++
毒性	+	-	-	-
穩定度	+	-	+	++

★ 產品資訊

貨號	品名	規格
C0005	Cell Counting Kit-8 (CCK-8)	1ml (100tests)

★ 優惠方案

- (1) 買4送1
- (2) 買10送5
- (3) 買50送蛋白質垂直電泳槽+轉漬槽一組
- (4) 買100送Luna-II細胞計數儀

小分子抑制劑

★ 產品優勢

- ✓ 細胞滲透性好:小分子結構,易通過細胞膜,作用迅速,效果好
- ✓ 純度高,化學成分明確:減少雜質帶來的負反應
- ✓ 高穩定度,批次間差異小
- ✓ 容易操作,可用於多種細胞、動物實驗



★ 熱門銷售商品

Small inhibitor 第二件7折

T1725 Y-27632 dihydrochloride	T2310 CHIR-99021	T2154 MG-132
T1020 Doxorubicin hydrochloride	T0968 Paclitaxel	T1766 Empagliflozin
T3015 Olaparib	T2125 Trametinib	T6116 Bleomycin Sulfate
T6013 Z-VAD(OMe)-FMK	T6253 Talazoparib	T1765 Erastin
T1537 Rapamycin	T2389 Dapagliflozin	T0466 Celecoxib
T2101 Navitoclax	T2586 Cabozantinib	T2399 Bortezomib
T1564 Cisplatin	T6680 Staurosporine	T2077 Adavosertib

活性化合物庫 compound libraries

TargetMol提供超過120多個化合物庫，這些化合物庫由數百萬個小分子抑制劑組成，每一個小分子抑制劑的結構特徵、化學資訊清晰準確，可用於cell induction研究, signaling pathway研究或高通量篩選上。根據其性質和來源，TargetMol把化合物庫分為：Focused Bioactive Libraries、Natural Product Libraries、Drug-like Compound Libraries、Fragment Libraries

TargetMol[®]
A DRUG SCREENING EXPERT



最暢銷的
化合物庫

★ Focused Bioactive Libraries 活性化合物庫

活性化合物庫有4萬種生物活性已知的小分子抑制劑，屬於藥物篩選平台建立之初的基本配套產品。

Approved / Repurposing

已知活性化合物按照上市狀態可分為上市藥物庫、FDA上市藥物庫、臨床期小分子藥物庫和臨床前化合物庫。

Disease Focused

已知活性化合物可以根據不同適應症或潛在適應症分為不同疾病類型的化合物庫，如抗癌化合物庫、抗糖尿病庫等。

Target / Pathway Focused

TargetMol的活性化合物庫按照Target / Pathway分為多種化合物庫，如MAPK抑制劑庫、離子通道庫等

Characteristic Bioactive Libraries

除了按照上市狀態、疾病類型分類，已知活性化合物還可以根據其共同屬性組成一些特色活性庫，如抗生素庫、活性脂質化合物庫、心血管毒性庫等

★ Natural Product Libraries 天然產物庫：

天然產物是指動物、植物、昆蟲、海洋生物和微生物體內的組成成分或其代謝產物，是無與倫比的化學多樣性來源，也是任何篩選藥理活性小分子抑制劑的理想起點。

Natural Product Library for HTS

可用於高通量篩選、高內涵篩選、新藥研發、藥理研究等領域，被全球高分期刊引用。

Characteristic Natural Product Libraries

根據植物的生物發生和來源及其具體應用所創建的化合物庫。

Natural Product Library for CADD

通過將 CADD 應用於內部化合物篩選，包含大量的天然產物及其衍生物。

Natural Product Derivatives Library

★ Drug-like Compound Libraries 類藥化合物庫：

從市場上有5000萬種化合物中篩選出質量可靠、類藥多樣性好的產品。

Compound Libraries for HTS/HCS

篩選質量可靠且具有良好類藥多樣性的化合物，確保庫的多樣性和高度特異性。
這些文庫已通過原廠內部生物測定和 200 多個實驗室進行廣泛驗證。

★ Fragment片段庫

基於片段的藥物發現 (Fragment-based drug discovery, FBDD)作為高通量篩選 (HTS) 進行傳統先導物識別的替代方法，識別與生物靶標的不同部分結合的較小的化合物，即“片段”。

General Fragment Libraries

Characteristic Fragment Libraries

內毒素移除 / 檢測套組

內毒素非細菌/病毒實驗專有，實驗室環境中無所不在



有效避開內毒素
造成的免疫反應



- ① 細胞內發炎反應
- ② 動物內毒素休克及其他副作用



大幅提升實驗
的正確性


全面
85折

內毒素檢測 Endotoxin Detection Assay Kit

✓ 應用：內毒素濃度測定 (定量 & 定性皆有)

✓ 優點：

1. 偵測數值線性好，實驗再現性一級棒
2. 即開即用包裝，讓您實驗順利沒煩惱
3. 高靈敏度，偵測範圍廣 (0.01-1 EU/mL)
4. 操作簡易快速，提升實驗效率

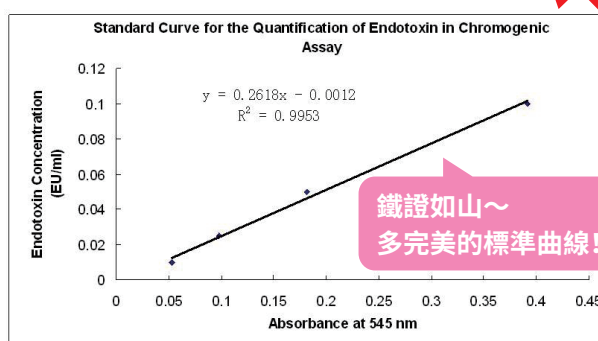

	ToxinSensor™ Chromogenic LAL Endotoxin Assay Kit	ToxinSensor™ Gel Clot Endotoxin Assay Kit
應用	精準定量 (顏色變化)	簡易偵測 (凝膠法)
靈敏度	0.01-1 EU/ml	0.25 EU/ml
Reconstitute LAL with LAL Reagent Water	Yes	Yes
分光光度計需求	Yes (OD 545nm)	No
包裝內容	◆ Ready-to-use reagents ◆ Endotoxin-free tips & tubes	◆ Ready-to-use reagents ◆ Endotoxin-free tips & tubes
樣品要求	Colorless and Clear liquid	N/A
貨號 (包裝)/定價	L00350 (32 rxns)	L00351 (1 kit) L00856 (with Standard, 0.03EU/ml) L00857 (with Standard, 0.06EU/ml) L00858 (with Standard, 0.125EU/ml) L00859 (with Standard, 0.25EU/ml)

內毒素移除 Endotoxin Removal System

✓ 應用：輕鬆去除樣本中的內毒素

✓ 優點：

1. 品質穩定、去除效率高
2. 操作簡單、提升實驗效率
3. 吸附能力好，可去除 >2,000,000 EU/mL
4. Resin 可重複使用
5. 包裝含耗材一應俱全，不須額外準備

貨號	產品名稱	包裝	原價	優惠價
L00338	ToxinEraser™ Endotoxin Removal Kit	1 kit	8,000	6,800

*套組中所有配件，包含 Resin, Regeneration Buffer, Equilibration Buffer, Endotoxin-free Tubes, Endotoxin-free Pipette Tips 皆可單獨購買，歡迎來電詢問！

高品質高穩定的 ELISA 套組

Elabscience®

熱銷500款，全部\$9,900/組

Why Elabscience®?

- ✓ 高精準度: CV<10% (inter and intra)
- ✓ 高靈敏度: pg level
- ✓ 高專一性: Cross reactivity <10%
- ✓ 品管嚴謹: 100%自行研發與製造，全部資料可追溯
- ✓ 包裝彈性: 48T/96T/大批訂購

Elabscience
品質保證。
不滿意，
免費更換!



Elabscience®

▶ 榮登2021 CiteAb Awards
年度最值得推薦ELISA Kit供應商




TOP500 詳細品項
請掃描QR code

好還要更好! Elabscience 新推出兩種進階 ELISA kit

1 省時間新配方: QuicKey ELISA Kits

樣本和 detection antibody 一起加入(如右圖)，省下1小時，
完全不影響 sensitivity, specificity, accuracy and stability

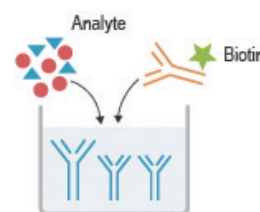

▪ QuicKey ELISA Kits 比傳統 ELISA 更快速更方便

	Traditional ELISA	QuicKey ELISA
反應時間	3.5h	2.5h 勝
樣本體積	100 uL	50 uL
步驟	7 steps (抗體和樣本分開加入)	6 steps (抗體和樣本一起加入)
試劑儲存方式	部分 -20°C, 部分 4°C	全部 4°C

▪ 產品資訊:

目前僅能針對以下蛋白，其他目標持續研發中

類別	偵測目標
Renal function biomarker	TF, NGAL, β 2-MG, MAU, RBP4, Cys-C, CLU
Inflammation biomarker	IgG, CRP, TGF- α , PCT, ALB, Acrp30, IgA, IgE, IgM, TG
Signal transduction	VEGF-A, TGF- α , Acrp30

2 高靈敏度新配方: CLIA kit (Chemiluminescent Immunoassay)

使用冷光 HRP substrate，靈敏度更升級，靈敏度為傳統 ELISA 的5倍，可到 10 pg/mL 等級，中間操作步驟完全相同。超過600種，任君挑選。

▪ CLIA 靈敏度更高，舉例 Mouse TFF3

	Traditional ELISA	CLIA
貨號	E-EL-M1200	E-CL-M0666
偵測目標	Mouse TFF3(Trefoil Factor 3, Intestinal)	
反應時間	3.5h	
偵測方式	吸光值 (A450)	冷光 (RLU)
靈敏度	46.88 pg/mL	9.38 pg/mL 勝
終止反應	需加入 stop solution	不需要

*Elabscience 亦單獨販售 ELISA 套組中單一 Buffer，歡迎來電詢問。